



Onze Altair plafondlift is een lichtgewicht afneembare lift met een discreet en modern design. De afneembaarheid zorgt voor aanzienlijk lagere investeringen in activa, aangezien dezelfde lift in meerdere kamers kan worden gebruikt. De lift is verkrijgbaar in drie tilcapaciteiten.

Onovertroffen comfort

In combinatie met ons assortiment tilbanden biedt de Altair een onovertroffen gebruikscomfort. Het tiljuk is verkrijgbaar in twee verschillende maten met een quick release-installatie, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor veel verschillende gebruikers en behoeften. Met tilcapaciteiten van 150 kg, 200 kg en 300 kg is de Altair de optimale oplossing voor faciliteiten die een veelzijdige tiloplossing nodig hebben.

Liftintelligentie

De Altair beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden opgehaald met behulp van onze Data- en

Serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.

Optimale functies

De Altair heeft een gebruiksvriendelijke handbediening en een secundair bedieningspaneel direct op de lift. De 3-punts ophanging zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en diepe zitpositie. De soft-start, soft-stop en constante tilsnelheid en richting maken tillen een comfortabele ervaring voor patiënten, ongeacht hun gewicht. De Altair biedt heffen met twee snelheden, een hoge batterijcapaciteit en gemakkelijk opladen van de batterij via de handbediening.

HUMAN CARE SWEDEN (HQ)

Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
Phone: +46 8 665 35 00
Fax: +46 8 665 35 10
info.se@humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA

10-155 Colonnade Road
Ottawa, ON K2E 7K1
Phone: +613.723.6734
Fax: +613.723.1058
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE NEDERLAND

Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
Phone: +31 577 412 171
Fax: +31 577 412 170
info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE UNITED STATES

8006 Cameron Road, Suite K
Austin, TX 78754
Phone: +512.476.7199
Fax: +512.476.7190
info.us@humancaregroup.com

Accessoires



Tiljuk

Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7")
55764 (55cm/21.7")



Elektrisch Kanteljuk

Voor gebruik met clip slings.
Art nr.: Small 92441*, Medium
92442, Large 92443



Handbediening

Twee snelheden met omhoog/
omlaag-modus. Ingang voor
opladen en USB-interface. IPX7
waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457




Upholstered Cover

Beschermt de gebruiker
tegen impact van de tiljuk.
Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866



Oplader Lift

Oplader met houder.
Makkelijk aan de muur te
bevestigen.
Art. nr.: 50899-US

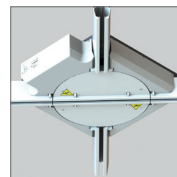

Gates and turntables

Biedt extra opties voor
liftoverdracht op rails. Art.
nr.: 55721 (Poort), 91884
(Draaischijf)



4-punts heffen

Maakt 4-punts heffen
mogelijk. Geplaatst op
beenhaak. Art. nr.: 55619



Distance Strap

Versterkte nylondraad en
metalen haken. Verlengt
de tilhoogte tot aan
100cm/39.3". Art. nr.:
20124-xx (specificeer lengte)



Secundaire controle

Secundair
bedieningspaneel aan de
achterkant van de lift voor
noodstopfunctie.
Geïntegreerde functie.



Lift Trolley

Vereenvoudigt het transport
van de lift tussen kamers.
Handig voor tilbanden
opslag.
Art. nr.: 50346



Weegschaal

Medische schaal. Maximaal
capaciteit 320kg/705,5lb. ISO-
en EN-conform. Art. nr: 50590
(RoomerS & Altair) 50591
(Heliq)



Inzichten

Liftintelligentie op
die cloudgebaseerde
opslag van verzamelde
gegevens mogelijk maakt.
Geïntegreerde functie.

*Spreader Bar Small: 92441 is mechanisch

Technische specificaties

Specificaties	Altair 150	Altair 220	Altair 300
Artikelnummer (Lift): Part Number (Tiljuk):	55200H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")	55210H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")	55220H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")
Afmetingen (W x H x L):	23,5cm x 14cm x 30cm 9.2" x 5.5" x 11.8"		
Tilcapaciteit, max.:	150kg/330lb	220kg/484lb	300kg/661lb
Gewicht van de Lift: Gewicht Tiljuk:	7.4kg / 16.2lb 1.3kg/2.8lb (55751) of 1.5kg/3.3lb (55764)		
Accu's:	2.9Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift: IP-klasse handbediening:	IPX4 IPX7		
Tilhoogte en tilsnelheid:	Tilhoogte: 212 cm / 83.5" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3 m/min — 70"/min - 118"/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 goedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Elektronisch en mechanisch		

*Landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America