



HUMAN CARE
Your Life. Your Way.



Selectie van

Producten

Human Care Nederland

Over Human Care Group

Human Care Group produceert en levert loophulpmiddelen, producten voor veilige transfers, verpleegbedden, medische apparatuur en meubilair. We verbeteren de bewegingsvrijheid en kwaliteit van zorg voor miljoenen mensen over de hele wereld. Onze visie is dat onze producten een natuurlijk onderdeel van het leven worden voor degenen die ze nodig hebben door innovatieve oplossingen te bieden met elk detail in gedachte.


Sinds de oprichting in Zweden in 1993 zijn we continue gegroeid naar een solide en succesvol internationaal opererend bedrijf. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Stockholm, Zweden, en we hebben kantoren in de VS, Canada, Duitsland, Nederland en Turkije. Met een uitgebreid netwerk van partners en distributeurs zijn onze producten wereldwijd vertegenwoordigd. De Human Care Group bestaat uit de Human Care bedrijven, Petermann en Kenmak.

Duurzaamheid is voor ons meer dan alleen het verminderen van de hoeveelheid afval en uitstoot – het is ervoor zorgen dat we de wereld op een betere plek achterlaten dan hoe we hem aantreffen. Human Care is een ISO13485 en ISO14001 bedrijf. Onze producten voldoen aan de MDR en andere relevante wetgevingen en standaarden.

Veiligheid, kwaliteit, bruikbaarheid en duurzaamheid staan bij ons voorop. In elk detail, in elk aspect.

Your life. Your way.

Bezoek ons online voor volledige productinformatie, bedrijfsinformatie en de laatste updates www.humancaregroup.nl

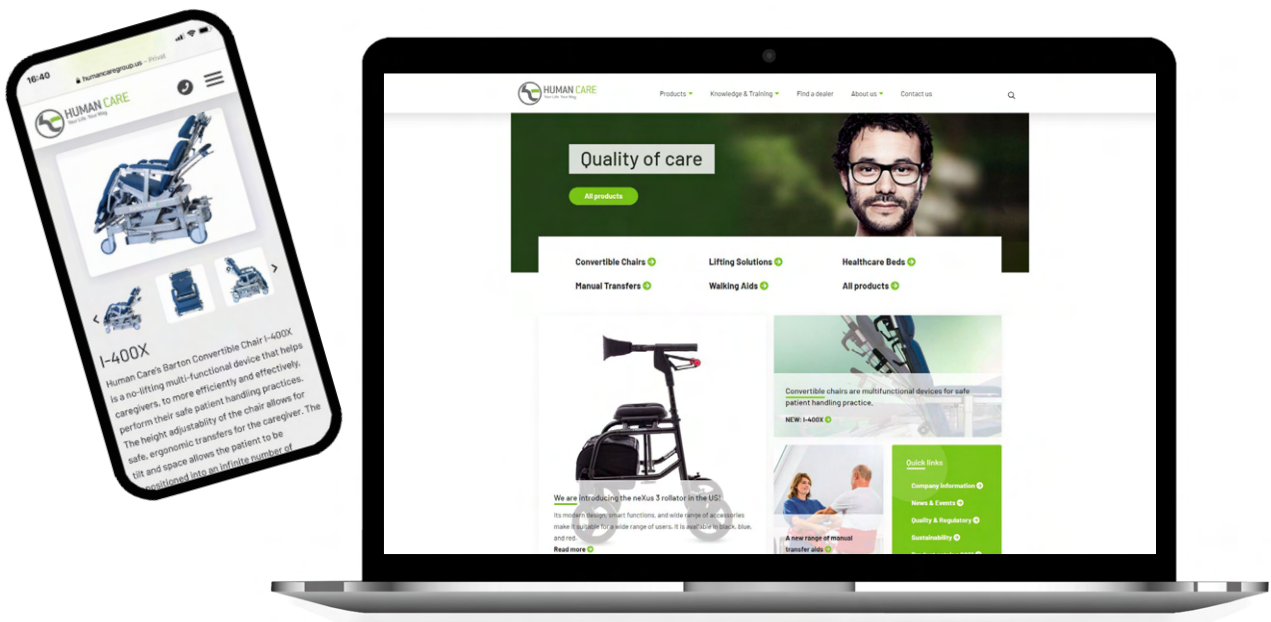

HUMAN CARE NEDERLAND
Eispeterweg 124
8076 PA Vierhouten

Telefoon: 0577 412 171
Email: info.nl@humancaregroup.com
Website: www.humancaregroup.nl

Inhoud



Tiloplossingen 5

Plafondliften

<i>Altair</i>	6
<i>HeliQ</i>	8
<i>Roomer S</i>	10

Verrijdbare Tilliften


<i>Diana II</i>	12
<i>Diana II Comfort</i>	14
<i>seBastian II</i>	16
<i>Lexa Pro II</i>	18
<i>Tonya II</i>	20
<i>Mobi Pro Flexi</i>	22

Tilbanden

<i>Back Belt E-clip</i>	24
<i>Columbus Sling E-clip</i>	26
<i>Full Body Sling E-clip</i>	28
<i>Toileting Sling E-clip</i>	30

Hygiëne 32

<i>Dolphin II - douche-/toiletstoel</i>	33
<i>Orka - douchestretcher</i>	35

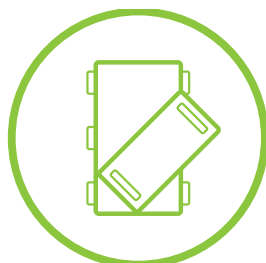

Manuele Transfer 37

<i>OnlyU Disposable Sliding Foil</i>	38
<i>Blue Motion Slide Soft</i>	39
<i>Alpha Rollboard Vision</i>	40

Medische Bedden 42

<i>Floorline LTC</i>	43
<i>Floorline-i</i>	45
<i>Florline-i Plus</i>	47



Loophulpmiddelen 49

<i>Algemene informatie</i>	50
----------------------------	----

We zijn hier om te helpen



ONDERSTEUNING EN ONDERWIJS

We weten hoe belangrijk het is dat een product wordt gebruikt zoals het bedoeld is. Correct gebruik is uiterst belangrijk – niet alleen voor het algehele welzijn van de gebruiker, maar ook voor de levensduur van het product.

Daarom bieden wij producttraining aan. Ons verkoopteam, ondersteunend personeel en trainers zijn specialisten in zowel het gebruik als de producten zelf. Ze kunnen helpen bij het organiseren van workshops, in-services of trainingen voor kleine groepen over onze producten.

INSTALLATIE PLAFONDLIFTSYSTEMEN

Als architect of aannemer, die betrokken is bij de bouw van verpleeghuizen of ziekenhuizen, bent u misschien niet bekend met plafondliften en de eisen voor de installatie ervan.

Om u te helpen bij het ontwerpen en bouwen van de faciliteit van uw klant, kunnen we op verzoek zowel algemene installatietekeningen in de meeste belangrijke formaten, inclusief CAD-tekeningen, als speciale installatieontwerpen leveren. Onze oplossingen maken uw leven gemakkelijker en worden snel, eenvoudig en gratis aangeboden.



TRAINING VOOR INSTALLATEURS EN SERVICE TECHNICI

Onze producten kunnen alleen worden geïnstalleerd door erkende professionals. Human Care voert jaarlijkse certificeringsprogramma's uit voor haar klanten en partners.

Onze training bestaat uit een dagvullend programma dat interessant is voor installateurs en servicetechnici. Het is een zeer hands-on en praktische training waarin de unieke eigenschappen van de producten, de installatie ervan en casuïstiek aan bod komt. Tijdens deze dag is er voldoende ruimte voor vragen en meer diepgang, alles in een mooie en goed geoutilleerde showroom.

Neem contact met ons op als je ondersteuning nodig hebt!

Tiloplossingen



Altair



Portable

Drie tilcapaciteiten

Lichtgewicht



Onze Altair plafondlift is een lichtgewicht afneembare lift met een discreet en modern design. De afneembaarheid zorgt voor aanzienlijk lagere investeringen in activa, aangezien dezelfde lift in meerdere kamers kan worden gebruikt. De lift is verkrijgbaar in drie tilcapaciteiten.



Onovertroffen comfort

In combinatie met ons assortiment tilbanden biedt de Altair een onovertroffen gebruikscomfort. Het tiljuk is verkrijgbaar in twee verschillende maten met een quick release-installatie, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor veel verschillende gebruikers en behoeften. Met tilcapaciteiten van 150 kg, 200 kg en 300 kg is de Altair de optimale oplossing voor faciliteiten die een veelzijdige tiloplossing nodig hebben.



Liftintelligentie

De Altair beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden opgehaald met behulp van onze data- en

serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.

Optimale functies

De Altair heeft een gebruiksvriendelijke handbediening en een secundair bedieningspaneel direct op de lift. De 3-punts ophanging zorgt voor een gelijkmatige gewichtsverdeling en diepe zitpositie. De soft-start, soft-stop en constante tilsnelheid en richting maken tillen een comfortabele ervaring voor cliënten, ongeacht hun gewicht. De Altair biedt tillen met twee snelheden, een hoge batterijcapaciteit en gemakkelijk opladen van de batterij via de handbediening.

Accessoires



Tiljuk

Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7")
55764 (55cm/21.7")



Elektrisch Kanteljuk

Voor gebruik met clip slings.
Art nr.: Small 92441*, Medium
92442, Large 92443




Handbediening

Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX7 waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457




Bekleding tiljuk

Bescherm de gebruiker tegen impact van de tiljuk. Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866

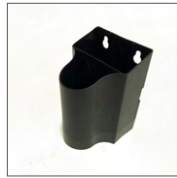

Oplader Lift

Oplader met houder. Makkelijk aan de muur te bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU

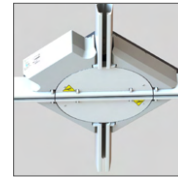

Gates and turntables

Biedt extra opties voor liftoverdracht op rails. Art. nr.: 55721 (Poort), 91884 (Draaischijf)



4-punts heffen

Maakt 4-punts heffen mogelijk. Geplaatst op beenhaak. Art. nr.: 55619



Distance Strap

Versterkte nylondraad en metalen haken. Verlengt de tilhoogte tot aan 100cm/39.3". Art. nr.: 20124-xx (specificeer lengte)



Secundaire controle

Secundair bedieningspaneel aan de achterkant van de lift voor noodstopfunctie. Geïntegreerde functie.



Lift Trolley

Vereenvoudigt het transport van de lift tussen kamers. Handig voor opslag van tilbanden.
Art. nr.: 50346



Weegschaal

Medische schaal. Maximale capaciteit 320kg/705,5lb. ISO-en EN-conform. Art. nr: 50590 (RoomerS & Altair) 50591 (HeliQ)



Systeem management

Intelligent systeem om al uw gebruikers- en onderhoudsdata op te slaan en uit te lezen.

*Spreader Bar Small: 92441 is manueel

Technische specificaties

Specificaties	Altair 150	Altair 220	Altair 300
Artikelnummer (Lift): Part Number (Tiljuk):	55200H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")	55210H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")	55220H-[landspecifieke code*] 55751 (45cm/17.7") of 55764 (55cm/21.7")
Afmetingen (W x H x L):	23,5cm x 14cm x 30cm 9.2" x 5.5" x 11.8"		
Tilcapaciteit, max.:	150kg/330lb	220kg/484lb	300kg/661lb
Gewicht van de Lift: Gewicht Tiljuk:	7.4kg / 16.2lb 1.3kg/2.8lb (55751) of 1.5kg/3.3lb (55764)		
Batterijen:	2.3Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift: IP-klasse handbediening:	IPX4 IPX7		
Tilhoogte en tilsnelheid:	Tilhoogte: 212 cm / 83.5" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3 m/min — 70"/min - 118"/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 goedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Elektronisch en mechanisch		

*Landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

HeliQ



Stationaire plafondlift

Elektrische traverse

In-rail opladen



Onze HeliQ-lift is een moderne, compacte stationaire lift die in een railsysteem of vrijstaand portaalsysteem kan worden geïnstalleerd. Het is een oplossing die geschikt is voor zowel acute zorginstellingen, verpleeghuizen als thuiszorgomgevingen.



Eigentijds ontwerp

De HeliQ stationaire plafondlift heeft een moderne, discrete uitstraling die gemakkelijk in elke omgeving past. Het kleine formaat zorgt voor gebruiksgemak in zowel institutionele als thuiszorgtoepassingen. De lift is verkrijgbaar in drie verschillende modellen met drie verschillende tilcapaciteiten. Het biedt optimaal comfort voor de cliënt met 2-punts of 4-punts ophangbeugels in verschillende lengtes die geschikt zijn voor vrijwel elke cliënt. Afhankelijk van het gekozen juk kunnen tilbanden met lussen of clips gebruikt worden.



Liftintelligentie

De HeliQ beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden

gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden opgehaald met behulp van onze data- en serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.

Power Traverse en In-Rail opladen

De HeliQ-liften kunnen optioneel worden aangesloten op een krachttraverse, waardoor zijdelings gemotoriseerde beweging mogelijk is, inclusief de mogelijkheid om gordijnopeningen in rails te passeren. De HeliQ power traverse heeft dubbele snelheid, bescherming tegen hoog water (IPX4) en een veilige werklust van 300 kg/661 lb. De HeliQ kan ook werken met in-rail opladen, waardoor de lift altijd klaar is voor gebruik.

Accessoires



Tiljuk

Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7")
55764 (55cm/21.7")



Bekleding tiljuk

Bescherm de gebruiker tegen impact van de tiljuk. Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866



4-punts tiljuk

Maakt 4-punts tillen mogelijk.
Art. nr.: 55619




Power traverse

Maakt zijdelingse gemotoriseerde beweging mogelijk. Bestellen met lift.



Elektrisch Kanteljuk

Voor gebruik met clip slings in ziekenhuis of andere zorgomgevingen. Art nr.: Small 92441*, Medium 92442, Large 92443

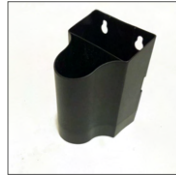

Oplader Lift

Oplader met houder. Makkelijk aan de muur te bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU



Distance Strap

Versterkte nylondraad en metalen haken. Verlengt de tilhoogte tot aan 100cm/39.3". Art. nr.: 20124-xx (specificeer lengte)




Weegschaal

Medische schaal. Maximale capaciteit 320kg/705,5lb. ISO- en EN-conform. Art. nr: 50590 (RoomerS & Altair) 50591 (HeliQ)




Handbediening

Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX7 waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457

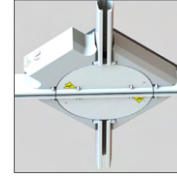

Gates and turntables

Biedt extra opties voor liftoverdracht op rails. Art. nr.: 55721 (Poort), 91884 (Draaischijf)

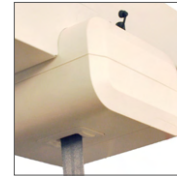

Secundaire controle

Secundair bedieningspaneel aan de achterkant van de lift voor noodstopfunctie. Geïntegreerde functie.



Systeem management

Intelligent systeem om al uw gebruikers- en onderhoudsdata op te slaan en uit te lezen.

*Spreader Bar Small: 92441 is manueel

Technische specificaties

Specificaties	HeliQ 150	HeliQ 220	HeliQ 300
Artikelnummer:	55100-[landspecifieke code*]	55110-[landspecifieke code*]	55120-[landspecifieke code*]
Artikelnummer: (Power Traverse)	55130-[landspecifieke code*]	55140-[landspecifieke code*]	55150-[landspecifieke code*]
Artikelnummer: (Tiljuk)	72754, 72755, 75757	72754, 72755, 75757	72754, 72755, 75757
Afmetingen (W x H x L):	23.5cm x 14cm x 23,5cm 9.2" x 5.5" x 9.2"		
Tilcapaciteit, max.:	150kg/330lb	220kg/484lb	300kg/661lb
Gewicht van de Lift:	7kg/ 15.7lb		
Gewicht Tiljuk:	0.6kg/1.5lb (72754), 1.1kg/2.5lb (72755), 1.4kg/3.1lb (72757)		
Batterijen:	2.3Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift:	IPX4		
IP-klasse handbediening:	IPX7		
Tilhoogte en tilsnelheid:	Tilhoogte: 212,2 cm / 83,5" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70°/min - 118°/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Elektronisch en mechanisch		

*Landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

Roomer S



Onze Roomer S plafondlift is een portable lift, die de mogelijkheid biedt om een cliënt in één transfer van de ene kamer naar de andere te verplaatsen zonder aanpassingen aan de deuropeningen.



Een comfortabele ervaring

De Roomer S biedt optimaal comfort bij gebruik met onze lustilbandenportfolio. De kamer-naar-kamerfunctie vermindert het aantal benodigde transfers en minimaliseert de belasting van zowel de cliënt als de zorgverlener. Het biedt een soft-start, soft-stop en constante tilsnelheid, ongeacht het gewicht en de richting van de cliënt, waardoor tillen een comfortabele ervaring wordt. De lift heeft een tilcapaciteit van 220 kg / 484 lb en kan worden gebruikt met een 2-, 3- of 4-punts tiljuk.

het unieke ontwerp de noodzaak voor gates and turntables overbodig. De Roomer S heeft ook een lichtgewicht tiljuk met snelsluiting in twee verschillende breedtes geschikt voor de meeste tilsituaties. Opladen kan via de handbediening voor optimale efficiëntie.

Liftintelligentie

De Roomer S beschikt over een geavanceerd technologieplatform waarmee het gebruik van de lift kan worden gevolgd en de verzamelde gegevens kunnen worden gevisualiseerd. Met deze geïntegreerde liftintelligentie kunnen gegevens worden opgehaald met behulp van onze data- en serviceapplicatie op een tablet of computer. Gedetailleerde informatie kan direct in de applicatie worden bekeken of naar andere media worden geëxporteerd voor aanvullende analyse.



Uniek ontwerp

De Roomer S is ook geschikt voor kamers met schuifdeuren of branddeuren, aangezien er geen aanpassing aan de deuropening nodig is, waardoor de installatie veel eenvoudiger wordt. Voor faciliteiten maakt

Accessoires



Tiljuk

Quick release voor optimaal gemak. Apart bestellen.
Art. nr.: 55751 (45cm/17.7")
55764 (55cm/21.7")



Basic Sling Net

Het Basic Sling Net is een voorbeeld van ons uitgebreide product portfolio.
Art nr: 25045-(size)



Handbediening

Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX7 waterbeschermingsklasse.
Art. nr.: 71457




Bekleding tiljuk

Bescherm de gebruiker tegen impact van het tiljuk. Tiljuk wordt apart verkocht.
Art. nr.: 50866



Oplader Lift

Oplader met houder. Makkelijk aan de muur te bevestigen.
Art. nr.: 50899-EU

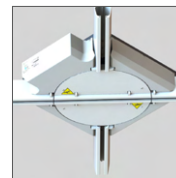

Gates and turntables

Biedt extra opties voor liftoverdracht op rails. Art. nr.: 55721 (Poort), 91884 (Draaischijf)



4-punts tillen

Maakt 4-punts tillen mogelijk. Geplaatst op beenhaak. Art. nr.: 55619



Distance Strap

Versterkte nylondraad en metalen haken. Verleng de tilband tot aan 100cm/39.3". Art. nr.: 20124-xx (specificeer lengte)



Secundaire controle

Secundair bedieningspaneel aan de achterkant van de lift voor noodstopfunctie. Geïntegreerde functie.



Lift Trolley

Vereenvoudigt het transport van de lift tussen kamers. Handige voor tilbanden opslag.
Art. nr.: 50346



Weegschaal

Medische schaal. Maximaal capaciteit 320kg/705,5lb. ISO- en EN-conform. Art. nr: 50590 (RoomerS & Altair)



Systeem management

Intelligent systeem om al uw gebruikers- en onderhoudsdata op te slaan en uit te lezen.

Technische specificaties

Specificaties	Roomer S		
Artikelnummer:	55300H-[landspecifieke code*]	Artikelnummer: (Tiljuk)	55751 (45cm/17.7") 55764 (55cm/21.7")
Afmetingen (W x H x L):	40cm x 16cm x 30cm 15.7" x 6.2" x 11.8"		
Tilcapaciteit, max.:	220kg/484lb		
Gewicht van de Lift: Gewicht Tiljuk:	8.9kg / 19.6lb 1.3kg/2.8lb (55751) or 1.5kg/3.3lb (55764)		
Batterijen:	2.3Ah, 2x12V		
Lader:	Ingaand: 100-240V, AC 50-60 Hz Uitgaand: 27.8V, 0.8A DC		
IP-klasse lift: IP-klasse handbediening:	IPX4 IPX7		
Tilhoogte en tilsnelheid:	Tilhoogte: 21.2cm/8.3" Tilsnelheid: 1.8m/min - 3m/min — 70"/min - 118"/min		
Goedkeuringen:	ROHS-2 oedgekeurd, getest en goedgekeurd volgens ISO 10535:2006 ETL Listed		
Nooddaalfunctie:	Elektronisch en mechanisch		

*landspecifieke code: AU-Australia, GB-Great Britan, EU-Europe, JP-Japan, NA-North America

Diana II



Compact

Maximaal gewicht
160 kg

Opvouwbaar



Ideale tillift voor vele situaties

Diana II is een uiterst stabiele, elektrisch bedienbare tillift met een compact, opvouwbaar, onderstel zodat deze tillift ideaal is voor beperkte ruimtes. Onze uitgebreide collectie van tilbanden biedt de gewenste ondersteuning.



Diana II biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer. Door zijn compacte maatvoering is Diana II ideaal voor gebruik in situaties met beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten, in sanitaire ruimtes. Deze eigenschap is ook prettig in instellingen waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn. De grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.

De pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. U heeft de keuze tussen een pootspreiding met twee voetpedalen of een volledig geïntegreerde elektrische bediening.

Diverse tilmogelijkheden

Diana II wordt geleverd met een tweepunts tiljuk of een manueel vierpunts kanteljuk. Het tweepunts kanteljuk is voorzien van lussenbevestiging waaraan de lussen van onze tilbanden veilig aangehaakt kunnen worden. Het manuele kanteljuk is voorzien van paddenstoelbevestigingen waardoor de E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk is in drie standen te gebruiken van lig, half-zit tot zit voor het positioneren van de cliënt. Uniek aan onze tilbanden is de bevestiging middels een E-clip.

De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke 'klik'. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.

Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Biedt volledige ondersteuning, waardoor comfortabel en veiligheid voor iedere gebruiker en situatie. Bevestiging middels veilige E-clip of lussen.
Artikelnummer 25010C-size



Hanger bar 4MSB
Handmatig bedienbaar kanteljuk, voorzien van bevestiging voor E-clip slings.
Artikelnummer 90558



Hanger Bar 2P
Tiljuk met 2-puntsbevestiging voor een tilband voorzien van lussen.
90567 (35 cm)
90557 (45 cm)
90568 (60 cm)



Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te bekleden daar waar gewenst.
Artikelnummer 50866


Gebruik



Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.

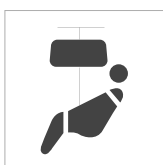

Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen (Ø 100 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 75 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp (1x Manuele pootspreiding MLA/1x Elektrische pootspreiding ELA).



Voetpedaal
Voetpedaal voor manuele pootspreiding (MLA).



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Specificaties	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 2P	Diana II ELA, 90556 met Hanger bar 4MSB
Lengte onderstel	1280 mm	1280 mm
Breedte onderstel	620 mm	620 mm
Hoogte mast	1360 mm	1360 mm
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	490 - 610 mm	490 - 610 mm
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1000 - 1120 mm	1000 - 1120 mm
Tilbereik	720 - 1940 mm	720 - 1940 mm
Draaicirkel	1400 mm	1400 mm
Hoogte onderstel	95 mm	95 mm
Diameter wiel	100 mm (achter) / 75 mm (voor)	100 mm (achter) / 75 mm (voor)
Eigen gewicht	45 kg	50 kg

Specificaties	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 2P	Diana II ELA, 90556 met Hanger Bar 4MSB
Maximale tilcapaciteit	160 kg	160 kg
Rotatie tiljuk	360 graden	360 graden
Opladbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal	Poedergecoat staal
Noodbediening	Ja	Ja
Handbediening functies	Hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator	Hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535

Diana II Comfort



Betrouwbaar

Maximaal
gewicht 230 kg

Groot tilbereik



Voor comfortabele en veilige transfers

Diana II Comfort is een stabiele, elektrisch bedienbare tillift met een hoog maximaal gebruikersgewicht zodat personen tot 230 kg comfortabel ondersteund kunnen worden tijdens het tillen. Onze uitgebreide collectie van tilbanden met veilige E-clips biedt de gewenste ondersteuning.



Tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en zelfs vanaf de vloer zijn voorbeelden van de vele tilsituaties waarin Diana II Comfort ondersteuning biedt. Deze tillift is geschikt voor vele cliënten, variërend in lengte en gewicht, door de hoge belastbaarheid, het grote tilbereik van de hefarm en het verstelbare kanteljuk.

Het tillen met het kanteljuk maakt het mogelijk de cliënt in de gewenste lig- of zithouding te brengen. Een praktische oplossing biedt het handmatig bedienbare juk, die drie standen biedt: lig, half-zit of zit. Voor intensief gebruik wordt een elektrisch kanteljuk aangeraden, waarin iedere hoek tussen lig en zit mogelijk is. Deze heeft een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig en veilig 360 graden gedraaid kan worden. Hierdoor wordt het gebruikersgemak enorm vergroot.

De elektrisch bedienbare pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. Het manoeuvreren van de tillift verloopt soepel door de kwalitatief hoogwaardige dubbele zwenkwielen met een grote diameter. Dit, en vele andere factoren, maken Diana Comfort II, een duurzaam kwaliteitsproduct.

De optimale ondersteuning kan geboden worden door Diana Comfort II te combineren met een van onze tilbanden. Uniek aan onze tilbanden is de bevestiging middels een E-clip. De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor een tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.

Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele ondersteuning voor een veilige transfer van de cliënt. Voorzien van onze E-clip. 25010C-X (25005C-X in Net/25011C-X In-Situ)



Columbus Sling E-clip
Als Full Body Sling en biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt. Artikelnummer 25040C-X



Toileting Sling E-clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek. Artikelnummer 25085C-X



Zachte bekleding voor juk
Mogelijkheid om het juk te bekleden daar waar gewenst. Artikelnummer 50866

Gebruik




Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.

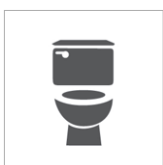

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie van het elektrisch bedienbare kanteljuk voor extra veiligheid.



Batterij
Extern oplaadbare batterij met Linak componenten.

Technische specificaties

Specificaties	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Lengte onderstel	1300 mm	1300 mm
Breedte onderstel	670 mm	670 mm
Hoogte mast	1350 mm	1350 mm
Min. Breedte pootspreiding (intern/extern)	520 - 670 mm	520 - 670 mm
Max. Breedte pootspreiding (intern/extern)	1030 - 1180 mm	1030 - 1180 mm
Hoogte duwbeugel	950 - 1270 mm	950 - 1270 mm
Draaicirkel	1440 mm	1440 mm
Diameter wiel	125 mm (achter, beremd), 100 mm (voor)	125 mm (achter, beremd), 100 mm (voor)
Onderstel hoogte	115 mm	115 mm
Tilliftbereik	680 - 1960 mm	680 - 1960 mm
Max. tilvermogen	230 kg	230 kg

Specificaties	Diana II Comfort 4ESB 90560	Diana II Comfort 4MSB 90559
Gewicht product	66 kg (incl. 4ESB)	66 kg (incl. 4MSB)
Juk kantelhoek	-17 tot + 42 graden	13, 29, 45 graden
Juk rotatie	360 graden met vergrendelling	360 graden
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal	Poedergecoat staal
Nooddaal functie	Ja	Ja
Handbediening	hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator	hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535	CE, ISO 10535

seBastian II



Ergonomisch

Max gewicht 230 kg

Compact



Perfect voor actieve transfers

Onze seBastian II is een compacte, elektrisch bedienbare sta-op-lift met een hoog maximaal gebruikersgewicht, zodat personen tot 230 kg veilig ondersteund worden tijdens het (op)staan. Extra ondersteuning en comfort kan worden bereikt door het gebruik van onze Back Belt E-clip.



Multifunctioneel en duurzaam

Deze volledig elektrische tillift biedt de cliënt ondersteuning tijdens de uitvoering van dagelijkse activiteiten, zoals opstaan, positioneren in een stoel, toiletbezoek, aan-/uitkleden of, maar ook voor revalidatiedoeleinden.

Naast de hoge belastbaarheid tot 230 kg kenmerkt onze seBastian II zich door het hoge tilbereik. Dit tilbereik in combinatie met de in hoogte verstelbare onderbeensteunen zorgen ervoor dat de tillift voldoet voor cliënten met zeer uiteenlopende lichaamslengtes.

Deze uiterst compacte tillift is zeer gemakkelijk verplaats- en manoeuvreerbaar dankzij het compacte formaat en de grote dubbele zwenkwielen van hoge kwaliteit.

Door de elektrisch bedienbare extra brede pootspreiding kan de seBastian II

eenvoudig om een stoel of toilet geplaatst worden. Hierdoor is het mogelijk om dicht bij een cliënt te komen en de transfer op een ergonomische wijze te laten verlopen.

Optimale ondersteuning

De seBastian II kan worden uitgebreid met onze unieke Back Belt tilband met E-clips. De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een tillift, die de kans op fouten door menselijk handelen aanzienlijk vermindert.


Onze tilband biedt optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers. De gepolsterde rug biedt een prettige ondersteuning in de rug van de cliënt tijdens de natuurlijke opwaartse bewegingsrichting. De Back Belt E-clip geeft tevens een veilig gevoel en voorkomt achterwaarts vallen. Gebruik van de Back Belt E-clip biedt de verzorger extra handen tijdens het transfer proces.

Accessoires



Back Belt E-clip

Biedt ondersteuning aan de rug voor meer comfort en veiligheid. Bevestiging middels veilige E-clip.
Artikelnummer 25130C-(X)

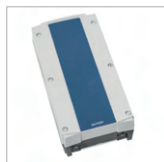

Batterij

Extra Linak batterij zodat de tillift altijd klaar is voor gebruik.
Artikelnummer 04-N0101-0012



Externe oplader

Lader voor het extern opladen van de batterij.
Artikelnummer 04-N0105-0018

Gebruik




Tillen in/uit een bed

Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel


Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.

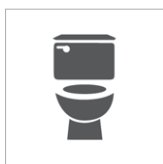

Toiletbezoek

Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken

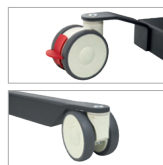

Zwenkwielen

2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening

Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Voetenplaat

Horizontale voetenplaat voorzien van antislip om voeten op de plaats te houden tijdens het opstaan/gaan zitten.



Onderbeensteun

In hoogte verstelbare, komvormige onderbeensteun met ingebouwde hoekverstelling die de sta-beweging volgt voor extra comfort.

Technische specificaties

Specificaties	seBastian II, 90554
Lengte onderstel	1080 mm
Breedte onderstel	658 mm
Breedte tillift (inclusief handgrepen)	750 mm
Hoogte mast	1130 mm
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	510 - 660 mm
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1010 - 1150 mm
Tilbereik	780 - 1740 mm
Draaicirkel	1240 mm
Hoogte onderstel	115 mm

Specificaties	seBastian II, 90554
Diameter wiel	125 mm (achter geremd), 100 mm (voor)
Eigen gewicht	60 kg
Maximale tilcapaciteit	230 kg
Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Materiaal frame	Poedergecoat staal
Noodstop	Ja
Nooddaalfunctie	Ja
Handbediening functies	Hoog/laag, pootspreiding, batterij status, service indicator
Certificering	CE, ISO 10535

Lexa Pro II



Precisietransfer
Uniek ontwerp
Aanpasbaar



Professionele zorg op het hoogste niveau

De Lexa Pro II is een moderne tillift die van alle mogelijkheden is voorzien en die aan de professionele zorgvragen voldoet. Deze kolomlift zorgt voor optimale ondersteuning voor het verplegende personeel en geeft een allround gevoel van veiligheid voor de cliënt.



Veelzijdig in gebruik

De Lexa Pro II is de optimale oplossing voor professionals, dat is waarom de tillift uitstekend geschikt is voor gebruik in verpleeg- en verzorgingshuizen en in ziekenhuizen. De Lexa Pro II helpt de verzorger bij het verticaal tillen uit bed, het van en naar een (rol)stoel of toilet transfereren en is optimaal geschikt voor het tillen vanaf de vloer. Dankzij de hoogwaardige zwenkwielen is de tillift gemakkelijk te manoeuvreren.



Optimale ergonomie

De tillift heeft een elektrische pootspreiding, dit maakt het mogelijk de lift probleemloos voor een stoel of voor een toilet in positie te brengen om een ergonomische transfer te bieden. Voor optimaal comfort is de Lexa Pro II uitgerust met een elektrisch 360° draaibaar kanteljuk die je op 4 standen vast kunt zetten. Dit juk maakt het mogelijk probleemloos de

cliënt te positioneren. Door de elektrische bediening is het voor de verzorger heel gemakkelijk de gewenste positie in te stellen. Het kanteljuk is voorzien van onze universele E-Clip systeem waarmee je veilig en moeiteloos de tilband kunt aanbrengen. Onze unieke en gepatendeerde E-clip is gemakkelijk te bevestigen en is geschikt voor iedere tillift.

Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle eisen van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele ondersteuning voor een veilige transfer van de cliënt. Voorzien van onze E-clip.
25010C-X (25005C-X in Net/25011C-X In-Situ)



Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full Body Sling. Biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X



Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transfereren van cliënten van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X



Accu Linac
Wisselaccu met lange levensduur. Artikelnummer BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)

Gebruik




Tillen in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.



Tillen vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.

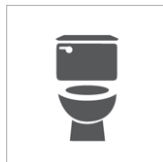

Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.



Zwenkwielen
2 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 100 mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.



Elektrische kanteljuk
Gemakkelijk positioneren van de cliënt. 360° draaibaar kanteljuk die je op 4 punten kunt vast zetten.



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Lexa Pro II			
Artikelnummer	90570	Max. tilvermogen	1.8cm/sec 0.7"/sec
Lengte onderstel	1350 mm	Rotatie van het juk	IBS power pack, 24V/2.9Ah Replacement Part no. R103-1014
Breedte onderstel	682 mm	Oplaadbare batterij (incl. laadsnoer)	Voor kant: 10cm/4" / Optioneel 7,4cm/3" Achter kant: 12.5cm/5" / Optioneel 10cm/4"
Hoogte mast	1880 mm / 2250 mm	Materiaal frame	2-Point - Artikelnummer: 90338 4-Point - Artikelnummer: 90339
Min. breedte onderstel (intern-extern)	535 - 682 mm	Nooddaal functie	4-Point - Artikelnummer: 90337 / 92501
Max. breedte onderstel (intern-extern)	1260 - 1407 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, zit/lig kanteling, pootspreiding, batterij status, service indicator
Tilbereik	340 - 1722 mm (1381 mm)		
Draaicirkel	1520 mm		
Diameter wiel	125 mm (achter) / 100 mm (voor)		

Tonya II



Ons kleinste
model
met kanteljuk



Ideale tillift voor kinderen

De Tonya II is het ideale hulpmiddel bij transfers voor kinderen of zorgvragers met een klein postuur. Bij deze tillift is werkelijk aan alles gedacht: de perfecte steun en het beste comfort voor de kleinere cliënt. Dit is mede mogelijk door het vierpunts elektrisch kinderkanteljuk.



Tonya II biedt ondersteuning aan kinderen of cliënten met een klein postuur tijdens het tillen vanaf het bed, in/uit een (rol)stoel, op/af het toilet en vanaf de vloer. Door zijn compacte maatvoering is de Tonya II ideaal voor gebruik in situaties met een beperkte ruimte, zoals thuis, bij smalle deurposten of in sanitaire ruimtes. Deze eigenschap is ook prettig bij instellingen waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn. De grote en kwalitatief duurzame zwenkwielen maken de tillift gemakkelijk te manoeuvreren. De pootspreiding maakt het mogelijk de tillift om een stoel/toilet te plaatsen om zo dicht mogelijk bij een cliënt te komen zodat de transfer ergonomischer verloopt. De pootspreiding is voorzien van een volledig geïntegreerde elektrische bediening.



Tonya II wordt geleverd met een elektrisch kinderkanteljuk. Het kanteljuk is voorzien van paddenstoelbevestigingen waaraan de E-clips van onze tilbanden veilig bevestigd kunnen worden. Het kanteljuk is in iedere hoek tussen lig en zit traploos in te stellen. Deze heeft een rotatiepunt zodat de cliënt eenvoudig en veilig 360 graden gedraaid kan worden. Hierdoor wordt het gebruikersgemak enorm vergroot.

Onze universele E-clip is een unieke gepatenteerde bevestiging voor de tilband aan een tillift, waardoor de kans op fouten aanzienlijk wordt verkleind. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijke 'klik'. Onze tilbanden bieden optimale ondersteuning voor extra betrouwbare, comfortabele en veilige transfers.

Accessoires



Full Body Sling E-clip Soft
Volledig en comfortabele ondersteuning voor een veilige transfer van de cliënt. Voorzien van onze E-clip.
25010C-X (25005C-X in Net/25011C-X In-Situ)



Columbus Sling E-Clip
Vergelijkbaar met de Full Body Sling. Biedt zelfs ondersteuning onder het zitvlak van de cliënt.
Artikelnummer 25040C-X



Toileting Sling E-Clip
Comfortabele en stevige toiletsling. Ideaal voor het transporteren van cliënten van en naar het toilet bezoek.
Artikelnummer 25085C-X



Accu Linak
Wisselaccu met lange levensduur. Artikelnummer BAJ1 (24 V DC, 1 x 2,9Ah)


Gebruik



Tilten in/uit een bed
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf het bed en helpt bij het positioneren in bed.



Van en naar de stoel
Geschikt voor het transfereren van en naar een (rol) stoel en het positioneren van de cliënt op een stoel naar keuze.

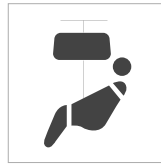

Tilten vanaf de vloer
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens het tillen vanaf de vloer.



Toiletbezoek
Geschikt voor het transfereren van en naar het toilet.

Kenmerken



Zwenkwielen
2 beremde zwenkwielen (Ø 100mm, achter) en 2 dubbele, ongeremde zwenkwielen (Ø 75mm, voor).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp (1x Manuele pootspreiding MLA/1x Elektrische pootspreiding ELA).



Vergrendeling
Vergrendeling voor rotatie van het elektrisch bedienbare kanteljuk voor extra veiligheid.



Duwbeugel
Grote duwbeugel, die vasthouden op een ergonomische hoogte mogelijk maakt, loopvormig zodat kleding of tilbanden niet ongewenst blijven haken.

Technische specificaties

Tonya II: 90553			
Lengte onderstel	1280 mm	Diameter wiel	100 mm (achter) / 75 mm (voor)
Breedte onderstel	620 mm	Eigen gewicht	45 kg
Hoogte mast	1360 mm	Maximale tilcapaciteit	120 kg
Minimale breedte onderstel (intern - extern)	490 - 610 mm	Rotatie tiljuk	360 graden
Maximale breedte onderstel (intern - extern)	1000 - 1120 mm	Opladbare batterij (incl. laadsnoer)	Capaciteit 2,9 Ah
Tilbereik	720 - 1940 mm	Materiaal frame	Poedergecoat staal
Draaicirkel	1400 mm	Noodbediening	Ja
Hoogte onderstel	95 mm	Handbediening functies	Hoog/laag, pootspreiding, kantelen, batterij status, service indicator

Mobi Pro Flexi



Draagbaar
Drie capaciteiten
Lichtgewicht



De Mobi Pro Flexi is een ergonomisch en compact mobiel hulpmiddel voor mobiliteit, ideaal voor mensen met weinig beenkracht en enige rompbalans die moeite hebben met lopen. De Mobi Pro Flexi is een uitstekende veilige transferoplossing voor vroege mobilisatie. Het biedt ondersteuning tijdens het staan en is een efficiënt hulpmiddel voor het verplaatsen van cliënten, waardoor de veiligheid en efficiëntie worden verbeterd.

Draaibare zitkussens

De Mobi Pro Flexi is een efficiënt en veilig hulpmiddel voor de zorgverlener om een patiënt te verplaatsen, wat de veiligheid en het tijdsbeheer van de zorgverlener verbetert. Het beschikt over roterende beklede stoelen en kniesteun voor eenvoudige toepassing. De voeten worden op een stevige voetplaat geplaatst en vervolgens trekt de patiënt zichzelf omhoog naar een staande positie met behulp van de geïntegreerde stevige beugel. Door simpelweg het zitkussen te draaien, wordt de Mobi Pro een comfortabele zitting waarop de cliënt kan rusten en zich kan verplaatsen.

Veelzijdig ontwerp

Het gebruik van de Mobi Pro Flexi stimuleert niet alleen mobilisatie en activiteit, maar geeft de zorgverlener ook snel, stabiel en

veilig transport van een cliënt naar bed, stoel of toilet en terug indien nodig. De Mobi Pro Flexi is uitgerust met een mechanisch mechanisme om de benen te spreiden, zodat het met de meeste zitplaatsen (zoals een toilet of rolstoel) zal werken. Het enorme instelbereik is eenvoudig met een hendel in drie standen te zetten.

Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle eisen van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Details



Voetplaat

Meegeleverd met product.
Duurzaam ABS-kunststof.
Reservedeel
Artikelnr. 1590035



Zwenkwielen

Dubbel wiel 7,5 cm/3".
Voorkant
Artikelnr. 1690060



Ergonomische handgrepen

Gemaakt van rubber.
Verkocht in paren.
Reservedeel
Artikelnr. 1510054

Gebruik



Gebruik van/naar een bed

Gebruik om een cliënt van/
naar een bed te verhogen/
verlagen.



Gebruik van/naar een stoel

Gebruik om een cliënt van/
naar een bed te verhogen/
verlagen.



Gebruik van/naar het toilet


Gebruik om een cliënt van/
naar een toilet te verhogen/
verlagen.

Kenmerken



Gemakkelijke beweging

De Mobi Pro Flexi is eenvoudig
te verplaatsen door één
zorgverlener. Een kleine
draaicirkel maakt het ideaal
voor kleinere ruimtes.

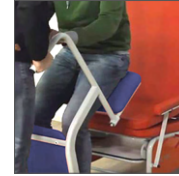


Verstelbare onderstel

Mechanische spreiding van
de poten zorgt ervoor dat het
om de meeste stoelen past.



Gepolsterde draaibare zitkussens

Maakt het mogelijk om het
product als tijdelijke zitplaats
te gebruiken.

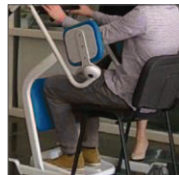

Gepolsterde kniekussens

Zacht, gedempt kniekussens
om de cliënt meer comfort
te bieden en de druk op de
knieën tijdens het staan te
verminderen.

Mobi Pro Flexi

Artikelnummer:	92500	Verstelbare poot {Min - Max}	43cm - 70cm
Breedte	58.5cm	Hoogte handvat {Inclined at Angle}	92cm - 100cm
Lengte	97cm	Gewicht	19.6kg
Hoogte	104cm	Draagvermogen	150kg
Diameter wiel	7.5cm		

Back Belt E-clip



Veilige E-clips

Ergonomische ondersteuning

Comfortabele pasvorm



Ondersteuning bij het opstaan

Tijdens het opstaan van een cliënt komt een verzorger vaak handen tekort om het voor beiden veilig en ergonomisch te laten verlopen. Onze Back Belt E-Clip biedt precies de ondersteuning die nodig kan zijn voor juist gebruik van onze sta-op-lift seBastian II.



Een natuurlijke beweging wordt gestimuleerd doordat de gepolsterde rug een prettige steun in de rug van de cliënt biedt tijdens de opwaartse bewegingsrichting. De Back Belt geeft tevens een veilig gevoel en voorkomt achterwaarts vallen. Door de geïntegreerde tailleband met gespluited blijft de band op zijn plaats zitten tijdens de gehele transfer. Het antislip aan de binnenzijde van het rugdeel voorkomt omhoog glijden van de band tijdens het opstaan. Hierdoor kunnen zowel de cliënt als de verzorger zich volledig richten op het sta-proces. De Back Belt E-clip is een welkome aanvulling tijdens het gebruik van een sta-op-lift wanneer de cliënt beperkte rompstabiliteit heeft of andere redenen waardoor (op)staan lastig is.

De universele E-clip is een bewezen bevestiging voor de tilband aan een lift, die de kans op fouten aanzienlijk vermindert. De clip wordt om de paddenstoelbevestiging van het tiljuk gelegd en sluit zich met een duidelijk hoorbare 'klik'. De verzorger weet nu dat de clip goed vastzit en niet meer onverwachts kan losschieten.

Gemakkelijk in passing en verzorging zijn onze tilbanden door de kleurcode voor snelle en gemakkelijke identificatie van de juiste maatvoering. Human Care tilbanden zijn geproduceerd volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden. Het ontwerp kenmerkt zich door een sterk harnas van groen band rondom de tilband, wat een belastbaar en duurzaam product biedt.



Gebruik



Van en naar het bed

Geschikt voor het opstaan vanaf een bed en gaan zitten op een bed.




Van en naar een stoel

Geschikt voor positionering in een stoel en voor staande transfers in en uit een stoel.



Sta-training


Geschikt voor sta-training en revalidatie-oefeningen.

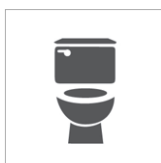

Toiletbezoek

Biedt extra steun tijdens een bezoek aan het toilet.

Kenmerken

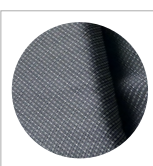


Polyester

Duurzaam materiaal, lage wrijvingscoëfficiënt waardoor gemakkelijk aan te brengen en schoon te maken.



E-clip ingebouwde borging

Eénhandig te bedienen. Universeel inzetbaar op alle liften die zijn uitgerust met paddenstoelbevestiging Ø 6,8-8,2 mm.

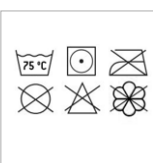

Verzorgingsinstructies

Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.




Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Back Belt E-clip S	25130C-S	Small		69 cm / 27.2"	27 cm / 10.6"	33cm / 13"
Back Belt E-clip M	25130C-M	Medium		83 cm / 32.7"	30 cm / 11.8"	39 cm / 15.3"
Back Belt E-clip L	25130C-L	Large		92 cm / 36.2"	34 cm / 13.4"	44 cm / 17.3"
Back Belt E-clip XL	25130C-XL	Extra Large		103 cm / 40.5"	39 cm / 15.3"	50 cm / 19.7"
Maximaal gebruikersgewicht:	250 kg / 550 lb					

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk, die voldoen aan de MDR.

Columbus Sling E-clip Soft

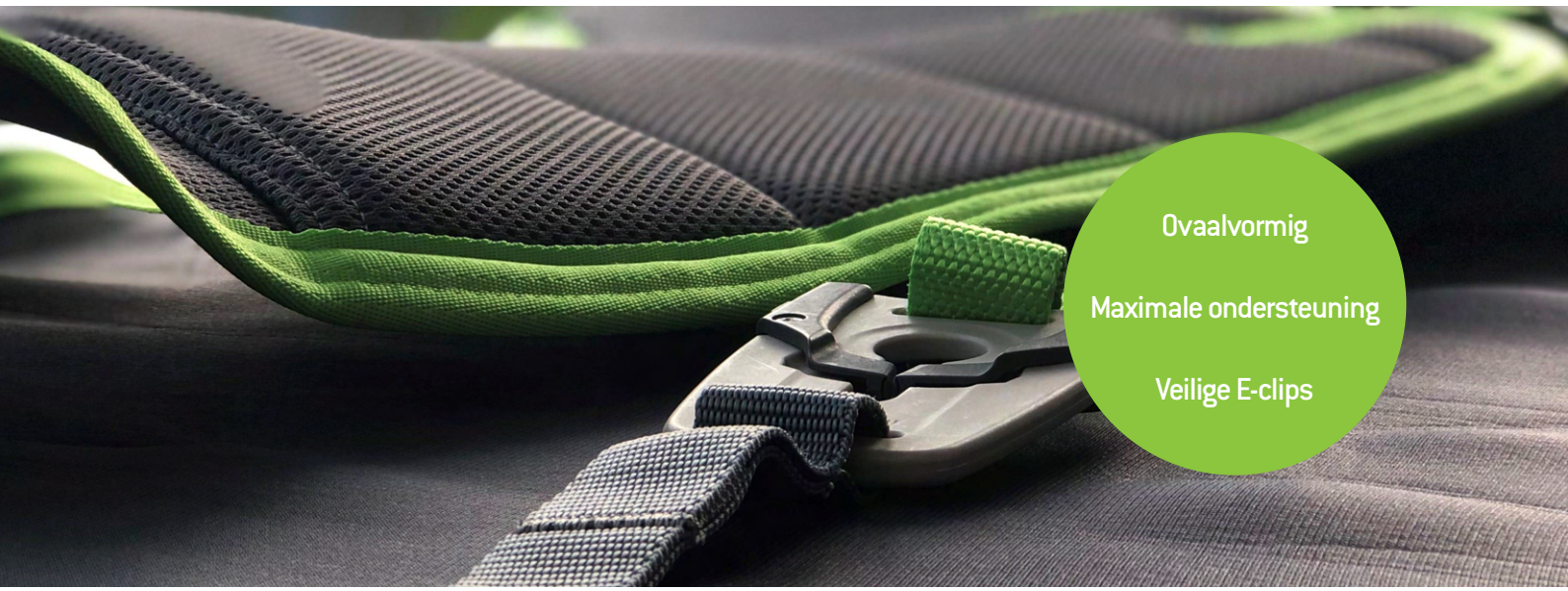

Ovaalvormig

Maximale ondersteuning

Veilige E-clips



Maximale ondersteuning

Onze Columbus Sling E-clip is een ovaalvormige tilband, die uitermate geschikt is voor personen waarbij het noodzakelijk is volledige ondersteuning te bieden, zelfs onder het zitvlak. Voor specifieke situaties is deze tilband het 'ei' van Columbus.



De cliënt ervaart een veilige houding door de comfortabele ondersteuning van het hoofd, de romp, de bovenbenen en bovendien het zitvlak. Door zijn vorm is deze tilband uitermate geschikt voor cliënten met een beperkte rompstabiliteit of ander lichaamszwaartepunt door bijvoorbeeld een amputatie of het dragen van een corset. De tilband heeft een ingenaaide zitting, waardoor de cliënt op de tilband zit en de beenslips zijn vervallen. Hierdoor beleeft de cliënt een optimaal omvattend gevoel wat ook een zeer rustgevend effect heeft op onrustige cliënten.

De geïntegreerde en versterkte hoofdsteen maakt deze tilband zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer.

Het Soft Air Mesh™ materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende netstof. Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft "two-way stretch" eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid. Combineer met de mobiele tillift Diana II Comfort en Diana II 4 MSB.



Een gekantelde positie vermindert druk op de benen van de cliënt, wat heel goed te realiseren is met deze tilband in combinatie met een vierpunts-kanteljuk. Deze gekantelde positie voorkomt tevens dat een cliënt met een verminderde rompblans en/of met de neiging om te overstrekken uit de tilband glijdt.

Accessoires



4-punts kanteljuk
voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.



4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.



4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.

Gebruik



Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen
vanaf een bed en gaan
zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor positio-
nering in een stoel en
voor transfers in en uit
een stoel.



Tillen vanaf de vloer
Ontworpen om op te tillen
vanaf de vloer.


Kenmerken



Soft Air Mesh
Optimaal drukverlich-
tend effect. De druk is
goed verdeeld binnen de
3D-structuur van de stof.
Voorkomt en beschermt.




E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen.
Universeel inzetbaar op alle
liften die zijn uitgerust met
paddenstoelbevestiging
Ø 6,8-8,2 mm.

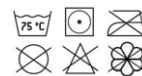

Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgings-
instructies op het label
van de tilband. Gebruik
een goedgekeurde
waszak tijdens het
wassen.

Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Columbus Sling E-clip Soft S	25040C-S	Small		11 cm / 4.3"	75 cm / 29.5"	110 cm / 43.3"
Columbus Sling E-clip Soft M	25040C-M	Medium		12 cm / 4.7"	85 cm / 33.4"	118 cm / 46.4"
Columbus Sling E-clip Soft L	25040C-L	Large		14 cm / 5.5"	90 cm / 35.4"	128 cm / 50.4"
Columbus Sling E-clip Soft XL	25040C-XL	Extra Large		16 cm / 6.2"	95 cm / 37.4"	137 cm / 54.1"
Maximaal gebruikersgewicht:	300 kg / 660 lb					

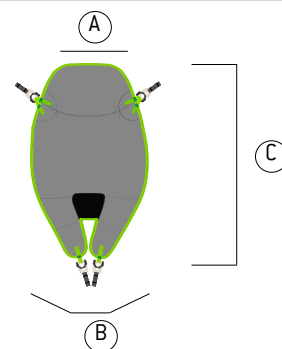

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk, die voldoen aan de MDR.

Full Body Sling E-clip



Comfortabele pasvorm

Optimale ondersteuning

Veilige E-clips



Geschikt voor vele tilsituaties

Onze Full Body Sling E-clip is een comfortabele tilband, die uitermate geschikt is voor personen die tijdens het tillen volledige ondersteuning van het lichaam prettig vinden. Deze tilband is verkrijgbaar met geïntegreerde hoofdsteun of met verwijderbare baleinen voor het geval deze tilband als verblijfsband wordt gebruikt.



De Full Body Sling E-clip biedt door zijn vorm een comfortabele ondersteuning aan het hoofd, de romp en bovenbenen, waardoor de cliënt een veilige houding ervaart. Deze tilband brengt de cliënt in een achterovergekanтелеde positie, die de druk op de benen vermindert. Dit kan ook een prettige houding zijn voor cliënten met een verminderde rompbalans en/of met de neiging om te overstrekken. Deze gekantelde positie voorkomt tevens dat een cliënt uit de tilband glijdt. De geïntegreerde en verstevigde hoofdsteun maakt deze tilband zelfs geschikt voor het tillen van een cliënt vanaf een vlakke ondergrond, zoals een vloer. Deze tilbanden zijn ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk en zijn verkrijgbaar in twee materialen.

Polyester net is een zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Het heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam. De tilband kan korte tijd achter de cliënt blijven. Een extra voordeel is dat de tilband geschikt is voor douchen en baden.

Het Soft Air Mesh materiaal is een lichtgewicht, koele, zachte en ademende netstof. Deze stof heeft vochtbeheersende eigenschappen, die transpiratievocht via het weefsel naar het oppervlak transporteert waar het snel kan verdampen. Het materiaal heeft tevens het voordeel dat het minder gevoelig is voor bacteriën voor betere hygiëne. De tilband heeft “two-way stretch” eigenschappen, die in staat zijn het lichaam te omhelzen als een tweede huid.

Accessoires



4-punts kanteljuk
Voor plafondtillift HeliQ, verkrijgbaar in Small (manueel), Medium en Large (elektrisch). Art. nr. 92441, 92442 en 92443.



4-punts kanteljuk
Voor Diana II Comfort 4ESB (elektrisch). Art. nr. 90560.



4-punts kanteljuk
Voor Diana II/ Diana II Comfort 4MSB (manueel), Art. nr. 90558/ 90559.



In-Situ
De Full Body Sling In-Situ E-clip heeft verwijderbare baleinen voor het geval de tilband achter de cliënt blijft. Art. nr. 25011C

Gebruik



Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen vanaf een bed en gaan zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor positionering in een stoel en voor transfers in en uit een stoel.




Douchen
Polyester Net materiaal is geschikt voor natte omgeving.



Tillen vanaf de vloer
Ontworpen om op te tillen vanaf de vloer.


Kenmerken

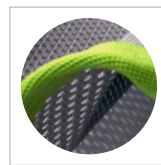


Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat ademt en snel droogt. Ideaal voor douchen en baden. Art. nr. 25005C.



E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen. Universeel inzetbaar op alle liften die zijn uitgerust met paddenstoelbevestiging Ø 6,8-8,2 mm.

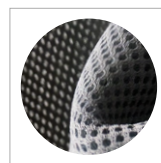


Soft Air Mesh
Optimaal drukverlichtend effect. De druk is goed verdeeld binnen de 3D-structuur van de stof. Voorkomt en beschermt. Art. nr. 25010C/25011C

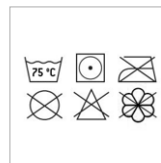

Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgingsinstructies op het label van de tilband. Gebruik een goedgekeurde waszak tijdens het wassen.

Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Full Body Sling E-clip Net S	25005C-S	Small		31 cm / 13.8"	85 cm / 30.3"	90 cm / 35.4"
Full Body Sling E-clip Soft S	25010C-S		S			
Full Body Sling In-Situ E-clip S	25011C-S					
Full Body Sling E-clip Net M	25005C-M	Medium		40 cm / 15.7"	92 cm / 34.6"	91 cm / 35.8"
Full Body Sling E-clip Soft M	25010C-M		M			
Full Body Sling In-Situ E-clip M	25011C-M					
Full Body Sling E-clip Net L	25005C-L	Large		40 cm / 17.3"	98 cm / 38.6"	100 cm / 39.3"
Full Body Sling E-clip Soft L	25010C-L		L			
Full Body Sling In-Situ E-clip L	25011C-L					
Full Body Sling E-clip Net XL	25005C-XL	Extra Large		44 cm / 18.9"	105 cm / 41.3"	102 cm / 40.1"
Full Body Sling E-clip Soft XL	25010C-XL		XL			
Full Body Sling In-Situ E-clip XL	25011C-XL					
Full Body Sling E-clip Net XXL	25005C-XXL	Extra Large (2x)		44 cm / 18.9"	111 cm / 43.7"	106 cm / 41.7"
Full Body Sling E-clip Soft XXL	25010C-XXL		XXL			
Full Body Sling E-clip Net XXXL	25005C-XXXL	Extra Large (3x)		44 cm / 18.9"	118 cm / 46.4"	108 cm / 42.5"
Full Body Sling E-clip Soft XXXL	25010C-XXXL		XXXL			
Maximaal gebruikersgewicht:		300kg / 660lb				

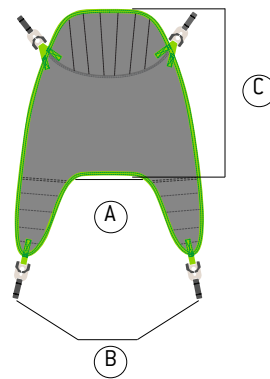

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk, die voldoen aan de MDR.

Toileting Sling E-clip Net



Gepolsterde rug

Zachte okselondersteuning

Grote opening



Ideaal voor toiletbezoek

Het vlot en eenvoudig kleden van het onderlichaam is vaak een uitdaging, vaak gepaard met tijdsdruk als het gaat om een toiletbezoek. Onze Toileting Sling E-clip biedt een praktische oplossing aan vele cliënten en hun verzorgers.



Comfortabele transfer

Het verwijderen van onderkleding, terwijl de cliënt zich in de tilband bevindt, is mogelijk door de relatief grote opening bij het zitvlak en de extra lange, gepolsterde beendelen. Deze tilband heeft een verstevigd rugdeel en zachte vulling onder de armen om adequate en comfortabele steun aan de cliënt te bieden tijdens de transfer, die voornamelijk in zit plaatvindt. Deze tilband kan ook gebruikt worden om cliënten van smalle rolstoelen naar kuipzittingen te tillen en in bad of douche.



Juiste houding voor toiletbezoek

Een optimale positie wordt bereikt doordat deze tilband bevestigd is aan een kanteljuk, waarmee de cliënt in de juiste houding gebracht wordt voor het toiletbezoek.

De Toileting Sling High heeft tevens een verstelbare nekondersteuning, die eveneens als hoofdondersteuning ingezet kan worden door de verstelbare banden. De hoofdsteun is prettig voor cliënten die de neiging hebben zichzelf te overstrekken en over een verminderde romp- en hoofdbalans beschikken.

Flexibel en luchtig

Polyester net materiaal heeft een lage wrijvingsweerstand zodat deze gemakkelijk aan te brengen is. Tevens droogt de tilband snel na het wassen of baden. Het materiaal heeft licht elastische eigenschappen om zich te vormen naar het lichaam van de cliënt. De tilband kan kortere tijd achter de cliënt blijven. Deze tilband is ontworpen voor vierpuntsbevestiging aan een kanteljuk. Combineer met de mobiele tillift Diana II Comfort en Diana II 4 MSB.

Accessoires



4-punts kanteljuk
voor plafondtillift HeliQ,
verkrijgbaar in Small
(manueel), Medium en
Large (elektrisch). Art. nr.
92441, 92442 en 92443.



4-punts kanteljuk
voor Diana II Comfort
4ESB (elektrisch).
Art. nr. 90560.




4-punts kanteljuk
voor Diana II/
Diana II Comfort
4MSB (manueel),
Art. nr. 90558/ 90559.




Van en naar het bed
Geschikt voor het tillen
vanaf een bed en gaan
zitten op een bed.



Van en naar een stoel
Geschikt voor position-
ering in een stoel en voor
een transfers in en uit
een stoel.

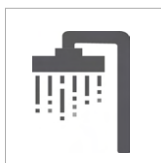


Douchen
Polyester Net materiaal
is geschikt voor natte
omgeving.

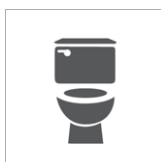

Toiletbezoek
Biedt extra steun tijdens
een bezoek aan het toilet.


Kenmerken

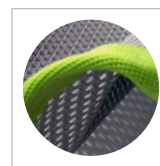

Polyester Net
Zacht, dun materiaal dat
ventileert en snel droogt.
Ideaal voor natte situaties
zoals baden en douchen.




E-clip ingebouwde borging
Eénhandig te bedienen.
Universeel inzetbaar op
alle liften die zijn uitgerust
met paddenstoelbeves-
tiging Ø 6,8-8,2 mm.

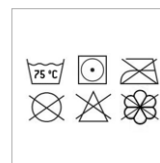

Verzorgingsinstructies
Was- en verzorgings-
instructies op het label
van de tilband. Gebruik
een goedgekeurde
waszak tijdens het
wassen.

Technische specificaties

Productnaam	Artikelnummer	Maat	Kleur	A	B	C
Toileting Sling E-clip Net JM	25085C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	73 cm / 28.7"	26 cm / 10.2"
Toileting Sling E-clip Net S	25085C-S	Small	S	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.3"	30 cm / 11.8"
Toileting Sling E-clip Net M	25085C-M	Medium	M	48 cm / 18.9"	90 cm / 35.4"	33 cm / 13"
Toileting Sling E-clip Net L	25085C-L	Large	L	50 cm / 19.7"	98 cm / 38.6"	33 cm / 13"
Toileting Sling E-clip Net XL	25085C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 22"	101 cm / 39.8"	38 cm / 15"
Toileting Sling High E-clip Net JM	25090C-JM	Junior Medium	JM	28 cm / 11"	74 cm / 29"	70 cm / 27.5"
Toileting Sling High E-clip Net S	25090C-S	Small	S	32 cm / 12.6"	82 cm / 32.2"	74 cm / 29.1"
Toileting Sling High E-clip Net M	25090C-M	Medium	M	48 cm / 18.8"	90 cm / 35.4"	79 cm / 31.1"
Toileting Sling High E-clip Net L	25090C-L	Large	L	50 cm / 19.6"	98 cm / 38.6"	90 cm / 35.4"
Toileting Sling High E-clip Net XL	25090C-XL	Extra Large	XL	56 cm / 11"	101 cm / 50"	100 cm / 39.4"
Maximaal gebruikersgewicht:	300kg / 660lb					

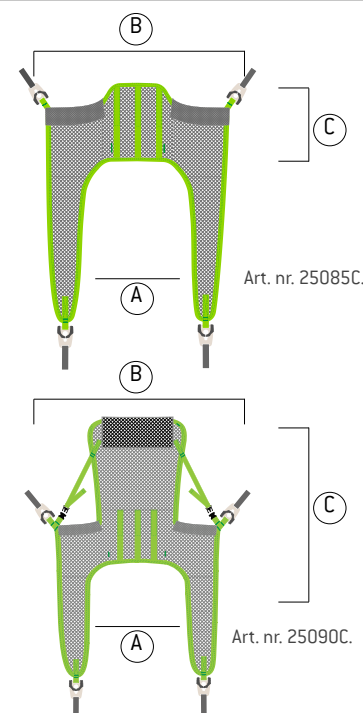

Human Care beschikt over een eigen gecertificeerd naaiatelier. Hierdoor zijn vele aanpassingen aan onze tilbanden mogelijk, die voldoen aan de MDR.



Hygiäne



Dolphin II



Stabiel
Compact design
Ergonomisch



Elektrisch in hoogte verstelbare en kantelbare douche-/toiletstoel

Onze Dolphin II maakt het door de elektrische hoogteverstelling mogelijk om dagelijkse hygiëne activiteiten ergonomisch uit te voeren. De cliënt kan in een ontspannen gekantelde uitgangshouding worden verzorgd.

Uniek aan onze Dolphin II is dat er vele aanpassingen en accessoires mogelijk zijn. Hierdoor is de stoel geschikt voor vele gebruikers en hun specifieke zorgsituatie, zoals lateraal support, verschillende zittingen en materiaalgebruik.

Het grote bereik van de zithoogte betekent dat de zorgverlener zelfs de verzorging van het onderlichaam en onderste extremiteiten op heuphoogte kan uitvoeren. De zitting en rugleuning kantelen als één geheel, waardoor de cliënt stabiel blijft zitten. De elektrisch bedienbare kanteling verloopt staploos. Dit maakt het voor zowel cliënt als zorgverlener mogelijk een comfortabele houding te vinden met slechts één hand en zonder enige krachtinspanning. De cliënt kan gemakkelijker van zit tot stand komen om de stoel te verlaten door de voorwaarste kanteling.

Dolphin II is voorzien van een hoofdsteen, die zowel in hoogte, diepte als hoek te verstellen is. In combinatie met de komvormige vormgeving ligt het hoofd stabiel en comfortabel op de steun. De voetenplaat is stapsgewijs in hoogte verstelbaar voor de juiste ondersteuning van de voetzool voor cliënten met verschillende lengtes. De plaat is voorzien van antislip om het gemakkelijker te laten zijn om de voeten op de plaat te houden. De plaat kan opgeklapt worden zodat deze niet in de weg zit voor transfers.



De armleuningen lopen door aan de voorzijde zodat de gebruiker een voorwaarste steun heeft, handig bij bv. het vooroverbuigen tijdens het wassen van intieme delen. Deze vormgeving bevordert ook dat cliënten zich veilig voelen. De armleuningen zijn daar wanneer nodig, maar eenvoudig opklapbaar zodat ze niet in de weg zitten bij een transfer in/uit de stoel.

Door zijn compacte maatvoering is Dolphin II ideaal voor gebruik in situaties met beperkte ruimte, zowel thuis, bij smalle deurposten als in sanitaire ruimtes. Of in een instelling waar vaak vele hulpmiddelen op de vloer aanwezig zijn. Het manoeuvreren van de stoel verloopt soepel door de kwalitatief hoogwaardige dubbele zwenkwielen met een grote diameter. Dit, en vele andere factoren, maken Dolphin II, een duurzaam kwaliteitsproduct.


Accessoires



Toiletemmer
Toiletemmer, inclusief deksel.
Artikelnummer: 04-M0312-0016



Toiletzitting
Toiletzitting met afsluitend deel voor de sleutelgatvormige opening voor extra comfort.
Artikelnummer: 04-M0307-0009

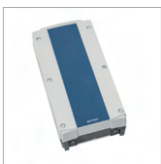

Batterij
Extra Linak batterij zodat de stoel altijd klaar is voor gebruik. Artikelnummer: 04-N0101-0012



Wandhouder
Wandhouder voor extern opladen van batterij.
Artikelnummer: 04-N0901-0043

Gebruik



Lichaamsverzorging
Biedt ondersteuning aan cliënten tijdens lichaamsverzorging, zoals aan/uitkleden en intieme hygiëne.



Ergonomisch
Goede manoeuvreerbaarheid en hoogteverstelling verbeteren de houdingen voor de zorgverlener, waardoor er een verminderde belasting op het lichaam optreedt.



Toiletbezoek
Verrijdbaar naar toiletruimte. Ondersteuning tijdens toiletbezoek. Overrijdbaar bij hangend toilet. Gebruik met toiletemmer mogelijk.



Douchen
Verrijdbaar naar badkamer. Biedt comfortabele en veilige ondersteuning tijdens het douchen en wassen (IPx5, spuitwaterdicht).


Kenmerken



Zwenkwielen
4 dubbele, beremde zwenkwielen (Ø 125 mm).



Handbediening
Vanzelfsprekende handbediening, gemakkelijk in gebruik, ergonomisch ontwerp met duurzaam spiraalsnoer.

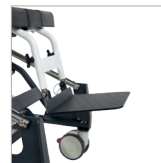

Voetenplaat
In hoogte verstelbare, horizontale voetenplaat voorzien van antislip om voeten op de plaats te houden tijdens o.a. het toiletbezoek. Opklapbaar voor transfers.



Neksteun
In hoogte, diepte en hoekverstelbare, komvormige PUR neksteun voor veilige en comfortabele ondersteuning van de nek en het hoofd.

Technische specificaties

Specificaties	Dolphin II 90561
Lengte	920 mm
Breedte	670 mm
Zithoogte	480-1000 mm
Hoogte duwbeugel (min/max)	1020-1310 mm
Afmeting zitting	420x430 mm
Kanteling	-5° tot +26°
Diameter beremde zwenkwiel	125 mm
Gewicht product	60 kg
Maximaal gebruikersgewicht	180 kg
Maximaal gewicht per armlegger	80 kg
Draaicirkel	1100 mm
Waterdichtheid	IPX5 (spatwaterdicht)
Waterdichtheid handbediening	IPX6

Specificaties	Dolphin II 90561
Hoofdsteun	verstelbaar in hoogte, diepte en hoek
Capaciteit batterij	2,9 Ah
Oplader geïntegreerd in control box	100-240/50/60 V/HZ
Materiaal onderstel	poedergecoat staal
Materiaal zitting, rugleuning, hoofdsteun	PUR
Toiletzitting	met vulstop en geïntegreerde geleiderails voor toiletemmer
Armleuningen	individueel opklapbaar, met geïntegreerde voorsteun
Voetenplaat	opklapbaar, in hoogte verstelbaar, voorzien van antislip
Handbediening functies	omhoog/laag, kanteling, status batterij, service indicatie
Inclusief	batterij en kabel voor intern opladen
Accessoire	veiligheidsriem (90562), verstelbaar in lengte

Orka Shower Trolley

Duurzaam

Eenvoudige
verstellingen

Veilig



De Orka douchewagen is een robuust en comfortabel stretcher om cliënten op een voor de zorgverlener ergonomische hoogte liggend te douchen. De douchewagen is voorzien van een hygiënisch en zacht matras, evenals een uitstekend kussen van waterdichte kwaliteit. De Orka is ook verkrijgbaar in junior en bariatrische modellen.

De Orka Douchewagen Functies

De Orka wordt geleverd in een hydraulische of elektrische hoogteverstelling en heeft opklapbare zijhekken. De waterafstotende, met vinyl beklede douchematras uit één stuk, heeft hoge zijkanten en een halfcilindrisch hoofdkussen voor extra comfort en veiligheid. De grote zwenkwielen bieden een eenvoudig stuursysteem waarmee u het zwenkwiel links voor in de stuurrichting kunt vergrendelen.

Het bovenste uiteinde van de brancard heeft een door gasveer ondersteunde helling tot 5 graden, dit voorkomt waterophoping rond het hoofd van de cliënt en vergemakkelijkt de afvoer door de geïntegreerde matrasafvoer die een flexibele slang bevat.

De Orka douchewagen is gemaakt van gepoedercoat gegalvaniseerd staal om ervoor te zorgen dat deze bestand is tegen de eisen van regelmatige blootstelling aan natte ruimtes. De stretcher is gemakkelijk te sturen, biedt snelle aanpassingen ten behoeve van de zorgverlener en een comfortabele houding voor de cliënt te garanderen.

Kwaliteit


Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Accessoires



Centraal remmen

Vergemakelijkt het manoeuvreren van het bed in krappe ruimtes.

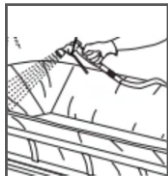

Comfortabele matras

Zacht en comfortabel matras met gesloten hoeken, makkelijk schoon te maken.



Hoofdkussen


Dankzij het comfortabele hoofdkussen kan de verzorger het hoofd van de cliënt veilig positioneren.

Gebruik



Afstandsbediening

Bediening, met ophanghaak, voor het omhoog en omlaag brengen van de douchewagen.

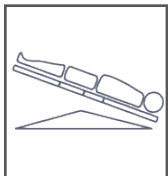

Trendelenburg

16 graden Trendelenburg / omgekeerd Trendelenburg



Hoofd-/zijrails

Gemakkelijk met één hand te ontgrendelen en niet in de weg bij het overstappen.

Kenmerken



Afvoer

De afvoer bevindt zich in het midden van het voeteneinde van de matras. Kunststof of metalen optie.



Grote wielen

Grote wielen maken het verplaatsen gemakkelijk met richtingsbegrenzing



Afvoerslang

Wordt geleverd met een flexibele afvoerslang van 700 mm lang en kan worden verlengd tot 2000 mm.

Technische specificaties


Productnaam	Breedte	Lengte	Maximaal Gebruikersgewicht	Artikelnummer
Orka Shower Trolley Junior Hydraulic	60 cm	150 cm	170 kg	10068972
Orka Shower Trolley Junior Electrical	60 cm	150 cm	170 kg	10068973
Orka Shower Trolley Standard Hydraulic	65 cm	190 cm	170 kg	10068911
Orka Shower Trolley Standard Electric	65 cm	190 cm	170 kg	10068913
Orka Shower Trolley Bariatric Hydraulic	80 cm	200 cm	250 kg	10068921
Orka Shower Trolley Bariatric Electrical	80 cm	200 cm	250 kg	10068923
Orka Shower Trolley Bariatric Hydraulic	90 cm	200 cm	250 kg	10068931
Orka Shower Trolley Bariatric Electric	90 cm	200 cm	250 kg	10068933



= 170 kg / 397 lbs

= 250 kg / 550 lbs

Manuele Transfer

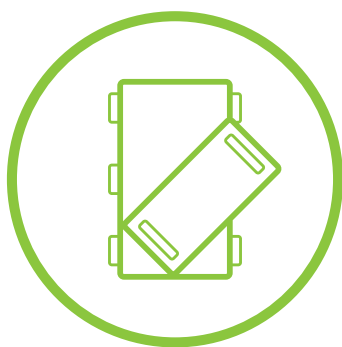



PETERMANN
part of the Human Care Group

Deze producten worden gedistribueerd
door Human Care voor
Petermann GmbH.




OnlyU Disposable Sliding Foil

OnlyU Wall Mount & Rack

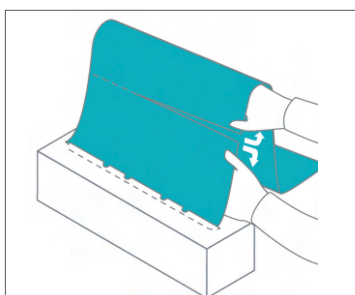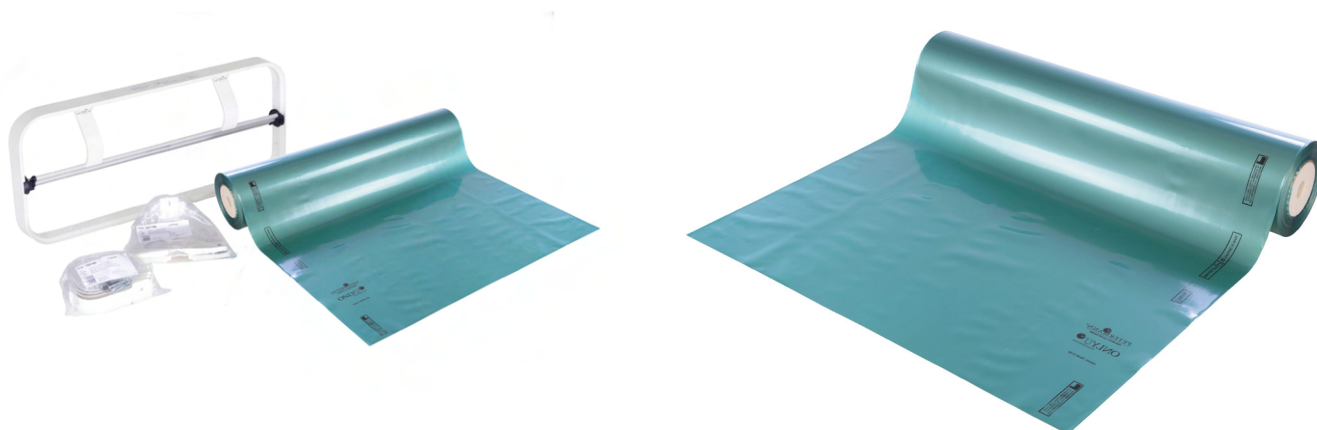

De OnlyU Disposable Sliding Foil is een tunnelvormige hoes die huidvriendelijk, scheurvast, latexvrij en biocompatibel is.

Dit transferhulpmiddel wordt in klinieken en ziekenhuizen gebruikt voor verschillende positieveranderingen en transfers van cliënten. De wegwerpbaarheid van de OnlyU wegwerp glijzeilen betekent een snelle en bijzonder hygiënische transfer voor cliënten. De Sliding Foil is op elke gewenste lengte te knippen en net als een glijzeil te gebruiken.

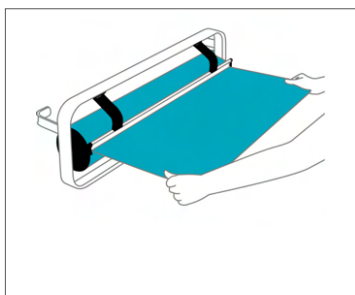

Technische specificaties

Productnaam	Art. nr.	Dimensions	Materiaal	Maximaal gebruikersgewicht
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-060.10-100	0,6 x 100 m 24" x 39,3"	Polyetyleen (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
OnlyU Disposable Sliding Foil incl. kartonnen doos	PM-065.10-100	0,6 x 100 m 24" x 39,3"	Polyetyleen (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
OnlyU Disposable Sliding Foil	PM-070.10-100	0,7 x 100 m 27,5" x 39,3"	Polyetyleen (LDPE), latex free	200 kg 440 lb
Wall Rack for Sliding Foils (muurbevestiging)	PMF-0200	46 x 70 x 18 cm / 18,1" x 27,5" x 7"	Stainless Steel	
OnlyU Wall mount voor rolbreedte: 60 cm (muurbevestiging)			PM-060.10	
OnlyU Wall mount voor rolbreedte: 70 cm (muurbevestiging)			PM-060.30	



Blue Motion Slide Soft

Superzacht
Multifunctioneel
Duurzaam



Het transferzeil Blue Motion Slide Soft is gemaakt van materialen met een lage wrijving en is cilindervormig, zodat ze de transferbeweging naadloos kunnen vergemakkelijken. Het zachte materiaal zorgt voor een stille transfer die prettig is voor de cliënt.

Er zijn verschillende formaten transferzeilen. Een goed gekozen transferzeil is van groot belang voor zowel de cliënt als de zorgverlener. Door het juiste transferzeil op de juiste manier te gebruiken, kan de transfer comfortabel en vooral veilig zijn.



Technische specificaties



Productnaam	Art nr	Dimensies	Materiaal
Blue Motion Slide Soft, 2 stuks	BM-S-0330	30 x 30 cm / 11,8" x 11,8"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0635	60 x 35 cm / 23,6" x 13,8"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0702	70 x 200 cm / 27,5" x 78,7"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0713	70 x 130 cm / 27,5" x 51,2"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0770	70 x 70 cm / 27,5" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0790	70 x 90 cm / 27,5" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0907	90 x 70 cm / 35,4" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0910	90 x 100 cm / 35,4" x 39,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0911	90 x 110 cm / 35,4" x 43,3"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-0913	90 x 130 cm / 35,4" x 51,2"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1170	110 x 70 cm / 43,3" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1190	110 x 90 cm / 43,3" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1370	130 x 70 cm / 51,2" x 27,5"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1390	130 x 90 cm / 51,2" x 35,4"	Polyamide, latex free
Blue Motion Slide Soft	BM-S-1970	195 x 70 cm / 76,8" x 27,5"	Polyamide, latex free



= 200 kg / 440lb



Alpha Rollboard Vision

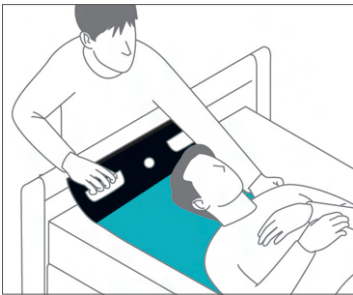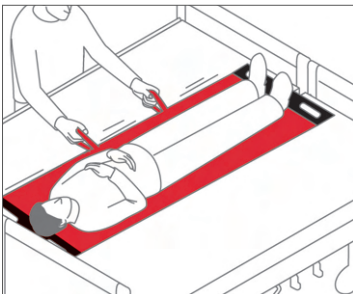

De Rollboard Vision is bijzonder geschikt voor zachte, pijnloze en wrijvingsarme zijwaartse transfers van liggende mensen met beperkte mobiliteit en zwaarlijvige personen. Met name hobbels of spleten, die ontstaan wanneer twee steunvlakken naast elkaar worden geplaatst, kunnen worden overbrugd. De transfer van liggende personen kan worden ondersteund in noodsituaties, om beweging van de cliënt te minimaliseren wanneer een diagnose nog niet beschikbaar is.

De Alpha Rollboard Vision maakt indruk met zijn uitstekende bedieningsgemak en compromisloze veiligheid tijdens transfer en verzorging, dankzij de unieke combinatie van hygiënische eigenschappen, kwaliteit, vorm en functie. De Alpha Rollboard Vision combineert grootte en waarde in zijn vermogen om de gemiddelde grootte en het gewicht van cliënten aan te kunnen. Het Rollboard vereist een hoes voor gebruik, bijvoorbeeld de textielen hoes, maar we raden aan om al onze hoezen en folies aan dit product toe te voegen.


Bij de ontwikkeling van de Alpha Rollboard Vision is rekening gehouden met de eisen die aan producten voor ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsinstellingen worden gesteld, samen met de professionele ervaring van mensen in de zorg.

Alle Rollboards zijn getest en goedgekeurd voor gebruik in röntgen- en MRI-scans.



Verschillende maten van Alpha Rollboard Vision


----- waar het rollboard opvouwt

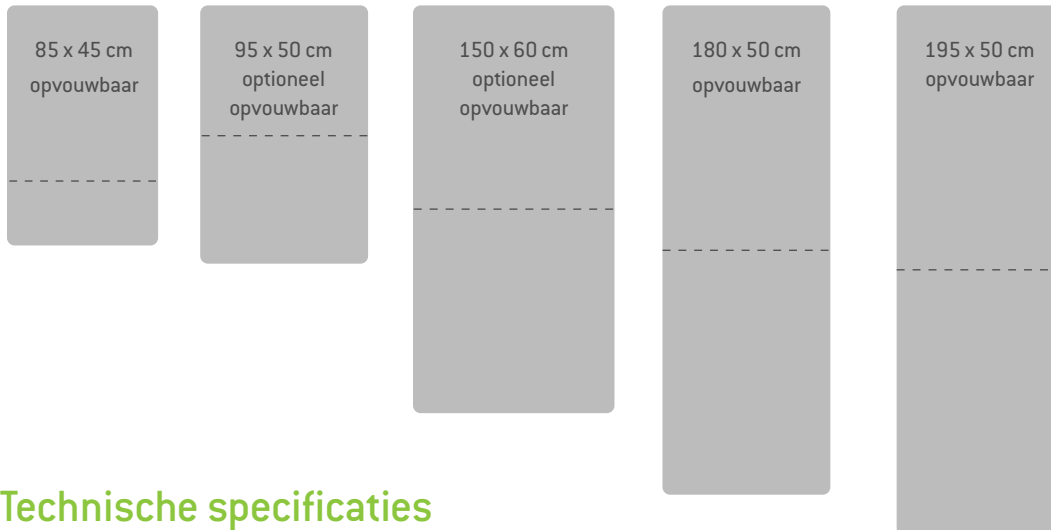

Technische specificaties

Rollboard (zonder Textile Cover)

	Meting	Artikelnummer
Alpha Rollboard Vision XS, dubbel opvouwbaar	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9050.0
Alpha Rollboard Vision S, opvouwbaar	85 x 45 cm / 33,5 x 17,7"	PMF-9075.0
Alpha Rollboard Vision M, opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9085.0
Alpha Rollboard Vision M, niet opvouwbaar	95 x 50 cm / 37,4 x 19,7"	PMF-9095.0
Alpha Rollboard Vision opvouwbaar (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9150.0
Alpha Rollboard Vision (Breed)	150 x 60 cm / 59 x 23,6"	PMF-9155.0
Alpha Rollboard Vision L, opvouwbaar	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9170.0
Alpha Rollboard Vision XL, opvouwbaar	195 x 50 cm / 76,7 x 19,7"	PMF-9180.0
Alpha Rollboard Vision L, met geïntegreerde kussen	180 x 65 cm / 70,9 x 25,6"	PMF-9185

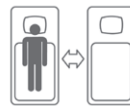

Rollboard Cover: Textiel

Alpha Rollboard Vision Textile Cover XS	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9051
Alpha Rollboard Vision Textile Cover S	80 x 45 cm / 31,5 x 17,7"	PMF-9076
Alpha Rollboard Vision Textile Cover M	90 x 50 cm / 35,4 x 19,7"	PMF-9086/96
Alpha Rollboard Vision Textile Cover (Breed)	145 x 60 cm / 57,1 x 23,6"	PMF-9151
Alpha Rollboard Vision Textile Cover L	170 x 50 cm / 66,9 x 19,7"	PMF-9171
Alpha Rollboard Vision Textile Cover XL	180 x 50 cm / 70,9 x 19,7"	PMF-9181

OnlyU Disposable Cover

OnlyU Disposable Cover S (50 stuks in dispenser)	47,5 x 85/ 18,7 x 33,5"	PMF-9077
OnlyU Disposable Cover M (120 stuks per rol)	90 x 53 cm / 35,4 x 20,9"	PMF-9090
OnlyU Disposable Cover (Breed) (70 stuks per rol)	160 x 61 cm / 63 x 24"	PMF-9152
OnlyU Disposable Cover L & XL (60 stuks per rol)	180 x 53 cm / 70,9 x 20,9"	PMF-9172

OnlyU Protection Foil

OnlyU Protection Foil XS, S (110 stuks per rol)	90 x 54,5 cm/35,4 x 21,6"	PMF-0191
OnlyU Protection Foil M, L & XL (55 stuks per rol)	180 x 54,5 cm/70,9 x 21,6"	PMF-0192

Rollboard:



Covers:



OnlyU Protection Foil

gebruikt op de bovenkant van de textielhoes.

Art nr: PMF-0191/ 90x54,5 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr: PMF-0192/ 180x54,5 cm
voor Rollboard Vision L, XL



OnlyU Wegwerphoes

gebruikt na het verwijderen van de textielhoes

Art nr: PMF-9090 / 90x53 cm
voor Rollboard Vision M

Art nr ex: PMF-9172 / 180x53 cm
voor Rollboard Vision L




Medische Betten



Floorline LTC



Gemakkelijk op
te bergen
Thuiszorg/LTC
Hout optie

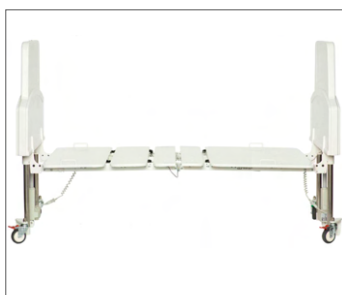

Onze Floorline LTC is het optimale ultralage bed voor thuiszorg of instellingen voor langdurige zorg. Het ontwerp uit één stuk maakt het gemakkelijk op te vouwen, op te bergen en te vervoeren. De Floorline LTC is verkrijgbaar in twee handige opties, waaronder een houtfineerenaferwerking die in elke ruimte past.

Klinische en cliëntvoordelen

De Floorline LTC zakt tot een afstand van 9,5 cm/3,7" vanaf de vloer. Deze afstand, hoewel ogenschijnlijk klein, heeft enorme voordelen voor zowel de cliënt als de instelling. Door slechts 5 cm toe te voegen aan de afstand tussen het bed en de vloer, wordt de impactkracht van een val met 50% verhoogd. Dit kan voor de cliënt het verschil zijn tussen een simpele blauwe plek of een gebroken heup, wat kan leiden tot een langere ziekenhuisopname of zelfs de dood. Naast de fysieke effecten hebben valblessures ook psychologische effecten op de cliënt, aangezien deze na een val een verlies aan vertrouwen en angst ervaart.

Optimale functies

De Floorline LTC beschikt over standaardposities die normaal alleen op ziekenhuisbedden voorkomen, zoals Trendelenburg, omgekeerde Trendelenburg en cardiale positionering. Met een volledig assortiment accessoires, een

gebruiksvriendelijke bediening en duurzame elektronica van LINAK is de Floorline LTC de beste keuze voor zorg.

Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Accessoires



IV Pole

Verstelbare hoogte. Kan aan beide uiteinden van het bed worden gemonteerd. Maximale SWL 7 kg/15.4 lb. Artikelnummer: IVP



Care Assist Rail

Ontworpen om cliënten veilig in en uit bed te helpen. Ergonomisch ontwerp. Artikelnummer: 90702



Extension Kit

Verlengt het bed met 17,5 cm voor langere cliënten. Artikelnummer: 90709



Handbediening

Vijf functies - inbegrepen bij bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder artikelnummer: LC2250, vergrendelingsleutel Artikelnummer: 75790

Gebruik



Self Help Pole/Papegaai

Helpt de cliënt bij het bewegen binnen de grenzen van het bed. Maximale SWL 75 kg/165,3 lb. Artikelnummer: SHP600



Side Rails

1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797



Wall Bumper Bar

Bescherm het hoofdende van het bed. Gemonteerd op onderste steunbeugel tussen wielen. Artikelnummer: 90705



Oxygen Holder/Zuurstoftank houder

Draagt zuurstoftank in maat C. Bevestigt aan de poten. Artikelnummer: 90707

Kenmerken



Compact

Compact op te vouwen voor opslag of transport.



Standaard Posities

Omvat auto-contour, rugleuning, knieverstelling, Trendelenburg, omgekeerde Trendelenburg, hartreanimatie.



Premium zwenkwielen

Eén centrale vergrendeling en drie sturende zwenkwielen voor eerste klas wendbaarheid.

Technische specificaties

Floorline LTC			
Artikelnummer. Wit Finish	90600 (EU), 90602 (UK), 90606 (NA), 90608 (AU)	Artikelnummer: Houtfijner Finish	90601 (EU), 90603 (UK), 90607 (NA), 90609 (AU)
Platformhoogte (Min-Max)	9.5cm - 70cm / 3.7" - 27.5"	Totale bedlengte (standaard tot verlengd met verlengset)	215cm - 232.5cm / 84.5" - 91.5"
Platformafmetingen (L x W)	215cm x 90.5cm / 84.5" x 35.5"	Platformafmetingen met uitbreidingsset (L x W)	232.5cm x 90.5cm / 91.5" x 35.5"
Afmetingen matras (L x W)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Matras met uitbreidingsset (L x W)	217.5cm x 90cm / 85.5" x 35.5"
Uitgaand Voltage	Max. 24V DC	IP Klasse	IPX4
Ingaand Voltage	120V, 60Hz (90404 to 90607), else 230V, 50Hz	Gewicht product	106kg / 234lb
Hoeken platformpaneel	Rugleuning 70°, Knieverstelling 45°, Knie 110°, Calf 25°, Trendelenburg/ omgekeerde Trendelenburg 18°	Tilcapaciteit, max.	200kg / 440lb
Arbeidscyclus	2 minuten operatie, 18 minuten rust	Maximaal gebruikersgewicht (SWL)	165kg / 363lb

Floorline i

Automatische
contour
Handset blokkeren
Thuiszorg/LTC



Onze Floorline i is een uitstekend ultralaag bed voor zowel ziekenhuizen als instellingen voor langdurige zorg. Het beschikt over standaard bedposities, een automatische contourknop voor hartreanimatie en een verscheidenheid aan optionele accessoires om tegemoet te komen aan de behoeften van meerdere cliënten.

Klinische en cliëntvoordelen

Het Floorline i-bed op vloerniveau kan worden verlaagd tot een afstand van 10 cm/4" van de vloer en een werkhogte van maximaal 80 cm/31,5". Dit maakt het een ideale optie voor instellingen met risicovolle valcliënten. Omdat de Floorline i zich slechts 10 cm van de vloer bevindt, rolt de cliënt uit het bed in plaats van te vallen, waardoor de gevaarlijke en kostbare gevolgen van een val worden vermeden. Bovendien is de behoefte aan extra monitoring van deze risicocliënten sterk verminderd, wat de faciliteit zelf een totale besparing oplevert.

Optimale functies

De Floorline i beschikt over standaardposities zoals Trendelenburg, reverse Trendelenburg en cardiale positionering. Met een

volledig assortiment accessoires, een gebruiksvriendelijke handbediening met vergrendelsleutel en duurzame elektronica van LINAK bevordert de Floorline i de veiligheid van zowel cliënt als zorgverlener.

Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Accessoires



IV Pole

Verstelbare hoogte. Kan aan beide uiteinden van het bed worden gemonteerd. Maximale SWL 7 kg/15.4 lb. Artikelnummer: IVP



Care Assist Rail

Ontworpen om cliënten veilig in en uit bed te helpen. Ergonomisch ontwerp. Artikelnummer: 90702



Extension Kit

Verlengt het bed met 17,5 cm voor langere cliënten. Artikelnummer: 90709



Handbediening

Vijf functies - inbegrepen bij bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder Art.nr: LC2250, vergrendelingsleutel Art.nr: 75790

Gebruik



Self Help Pole/Papegaai

Helpt de cliënt bij het bewegen binnen de grenzen van het bed. Maximale SWL 75 kg/165,3 lb. Artikelnummer: SHP600



Side Rails

1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797



Wall Bumper Bar

Bescherm het hoofdeinde van het bed. Gemonteerd op onderste steunbeugel tussen wielen. Artikelnummer: 90705



Oxygen Holder/Zuurstoftank houder

Draagt zuurstoftank in maat C. Bevestigt aan de poten. Artikelnummer: 90707

Kenmerken



Bediening

Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX5 waterbeschermingsklasse. Artikelnummer: 71457



Standaard Posities

Omvat auto-contour, rugleuning, knieverstelling, Trendelenburg, omgekeerde Trendelenburg, hartreanimatie.



Premium zwenkwielen

Eén centrale vergrendeling en drie sturende zwenkwielen voor eersteklas wendbaarheid.

Technische specificaties

Floorline i			
Artikelnummer	90300 (EU), 90301 (AU), 90302(NA), 90303 (UK)		
Platformpositie (Min-Max)	10cm - 80cm / 4" - 31.5"	Totale bedlengte (standaard tot verlengd met verlengset)	232.5cm - 250cm / 91.5" - 98.5"
Platformafmetingen (L x W)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Platformafmetingen met uitbreidingsset (L x W)	217.5cm x 90.5cm / 85.5" x 35.5"
Afmetingen matras (L x W)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Matras met uitbreidingsset (L x W)	217.5cm x 90cm / 85.5" x 35.5"
Uitgaand Voltage	Max. 24V DC	IP Klasse	IPX4
Ingaand Voltage	120V, 60Hz (90404 to 90607), else 230V, 50Hz	Gewicht product	150kg / 330lb
Hoeken platformpaneel	Rugleuning 70°, Knieverstelling 45°, Knie 110°, Calf 25°, Trendelenburg/omgekeerde Trendelenburg 18°	Tilcapaciteit, max.	250kg / 550lb
Arbeidscyclus	2 minuten operatie, 18 minuten rust	Maximaal gebruikersgewicht (SWL)	185kg / 407lb

Floorline i-Plus



Meerdere posities
Klaar voor technologie
Ultralaag



Onze Floorline i Plus is een compleet ultralaag bed voor de zorg. Met zijn uitgebreide positionering, elektronische CPR-functie en een digitale bedieningskast die toekomstige upgrades mogelijk maakt, biedt het Floorline i Plus ultralaag bed het hoogste niveau van zorg gecombineerd met maximale veelzijdigheid.

Klinische en cliëntvoordelen

Het Floorline i Plus vloerniveau bed is de perfecte oplossing voor het voorkomen van valblessures in ziekenhuizen en acute zorginstellingen. Het bed kan worden verlaagd tot een afstand van 10 cm vanaf de vloer en wordt verhoogd tot een werkhoogte van maximaal 80 cm om de bestaande initiatieven voor veilige cliënten en de veiligheid van zorgverleners te helpen bevorderen. Op een afstand van 10 cm van de vloer rolt de cliënt uit het bed in plaats van te vallen, waardoor de gevaarlijke en kostbare gevolgen van een val worden vermeden. Bovendien is de behoefte aan extra monitoring van deze risicocliënten sterk verminderd, wat bijdraagt aan de algehele financiële voordelen voor het ziekenhuis omdat er minder personeel nodig is.

Optimale functies

De Floorline i beschikt over standaardposities zoals Trendelenburg, reverse Trendelenburg en cardiale positionering. Met een volledig assortiment accessoires, een gebruiksvriendelijke handset met vergrendelsleutel en duurzame elektronica van LINAK bevordert de Floorline i de veiligheid van zowel cliënt als zorgverlener.

Kwaliteit

Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd om te voldoen aan alle vereisten van relevante normen. In elke fase van het ontwikkelingsproces krijgt elk afzonderlijk product uitgebreide aandacht in ontwerp, ontwikkeling en productie. Dit betekent dat een gebruiker van dit product vertrouwen heeft in de betrouwbaarheid en dat de zorgverlener vertrouwen heeft in de veiligheid ervan.

Accessoires



IV Pole

Verstelbare hoogte. Kan aan beide uiteinden van het bed worden gemonteerd. Maximale SWL 7 kg/15.4 lb. Artikelnummer: IVP



Care Assist Rail

Ontworpen om cliënten veilig in en uit bed te helpen. Ergonomisch ontwerp. Artikelnummer: 90702



Extension Kit

Verlengt het bed met 17,5 cm voor langere cliënten. Artikelnummer: 90709



Handbediening

Vijf functies - inbegrepen bij bed. Artikelnummer: 75746
Handsethouder Art.nr: LC2250, vergrendelingsleutel Artikelnummer: 75790

Gebruik



Self Help Pole/Papegaai

Helpt de cliënt bij het bewegen binnen de grenzen van het bed. Maximale SWL 75 kg/165,3 lb. Artikelnummer: SHP600



Side Rails

1/4 Lengte. Art. nr: 72794
1/2 Lengte. Art. nr: 72795
3/4 Lengte. Art. nr: 72797



Wall Bumper Bar

Bescherm het hoofdeinde van het bed. Gemonteerd op onderste steunbeugel tussen wielen. Artikelnummer: 90705



Oxygen Holder/Zuurstoftank houder

Draagt zuurstoftank in maat C. Bevestigt aan de poten. Artikelnummer: 90707

Kenmerken



Bediening

Twee snelheden met omhoog/omlaag-modus. Ingang voor opladen en USB-interface. IPX5 waterbeschermingsklasse. Artikelnummer: 71457



Standaard Posities

Omvat auto-contour, rugleuning, knieverstelling, Trendelenburg, omgekeerde Trendelenburg, hartreanimatie.



Premium zwenkwielen

Eén centrale vergrendeling en drie sturende zwenkwielen voor eersteklas wendbaarheid.

Technische specificaties

Floorline i Plus			
Artikelnummer	90500 (EU), 90501 (AU-1), 90502 (AU-2), 90503 (NA), 90504 (UK)		
Platformpositie (Min-Max)	10cm - 80cm / 4" - 31.5"	Totale bedlengte (standaard tot verlengd met verlengset)	232.5cm - 250cm / 91.5" - 98.5"
Platformafmetingen (L x W)	200cm x 90.5cm / 78.75" x 35.5"	Platformafmetingen met uitbreidingsset (L x W)	217.5cm x 90.5cm / 85.5" x 35.5"
Afmetingen matras (L x W)	200cm x 90cm / 78.7" x 35.5"	Matras met uitbreidingsset (L x W)	217.5cm x 90cm / 85.5" x 35.5"
Uitgaand Voltage	Max. 24V DC	IP Klasse	IPX4
Ingaand Voltage	120V, 60Hz (90404 to 90607), else 230V, 50Hz	Gewicht product	150kg / 330lb
Hoeken platformpaneel	Rugleuning 70°, Knieverstelling 45°, Knie 110°, Calf 25°, Trendelenburg/ omgekeerde Trendelenburg 18°	Tiicapaciteit, max.	250kg / 550lb
Arbeidscyclus	2 minuten operatie, 18 minuten rust	Maximaal gebruikersgewicht (SWL)	185kg / 407lb

Loophulpmiddelen



Loophulpmiddelen

Human Care biedt kwalitatief hoogwaardige rollators met ergonomische eigenschappen en een veilig ontwerp. Wij weten dat al onze gebruikers uniek zijn en onze producten zijn ontworpen met het individu in het achterhoofd.

Ons brede productportfolio biedt precies de juiste hoeveelheid hulp, die nodig is om een actieve levensstijl te kunnen leiden.



Rollators

Onze klanten moeten het hele leven stabiel en veilig kunnen lopen. Met het ouder worden wordt het moeilijker, maar daar hebben we een geweldige ondersteuning voor, onze neXus 3 rollator. Het helpt onze klanten om met een kleine inspanning van A naar B te komen. Het X-frame maakt deze stabiel en het design is modern voor elke stijl.

RA-Rollators

Het hebben van reumatoïde artritis kan een levensveranderende ervaring zijn. De ziekte kan iedereen treffen en omvat vaak pijn in ledematen, stijfheid en problemen met zelfstandig bewegen. Met een loophulpmiddel, zoals een van onze RA-rollators, kan de levenskwaliteit drastisch ten goede veranderen.



Trolley Walkers

Als de cliënt nog meer pijn heeft of moeite heeft met het vinden van stabiliteit, heeft hij misschien iets nodig om volledig op te leunen. Onze Trolley Walkers zijn hier precies voor ontworpen. Met hun stevige stalen frame en hun zacht beklede voortafel helpen ze cliënten met pijn om naar voren te leunen en toch vrij binnen en buiten te bewegen.



Zie meer op onze website.



Vergeet niet onze website te bezoeken
www.humancaregroup.nl

Your Life. Your Way.

www.humancaregroup.nl

HUMAN CARE NEDERLAND
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten

Telefoon: 0577 412 171
Email: info.nl@humancaregroup.com
www.humancaregroup.nl